


SKG

Масажер для колін W3 Pro


Посібник користувача Насолоджуйтесь враженнями від сили

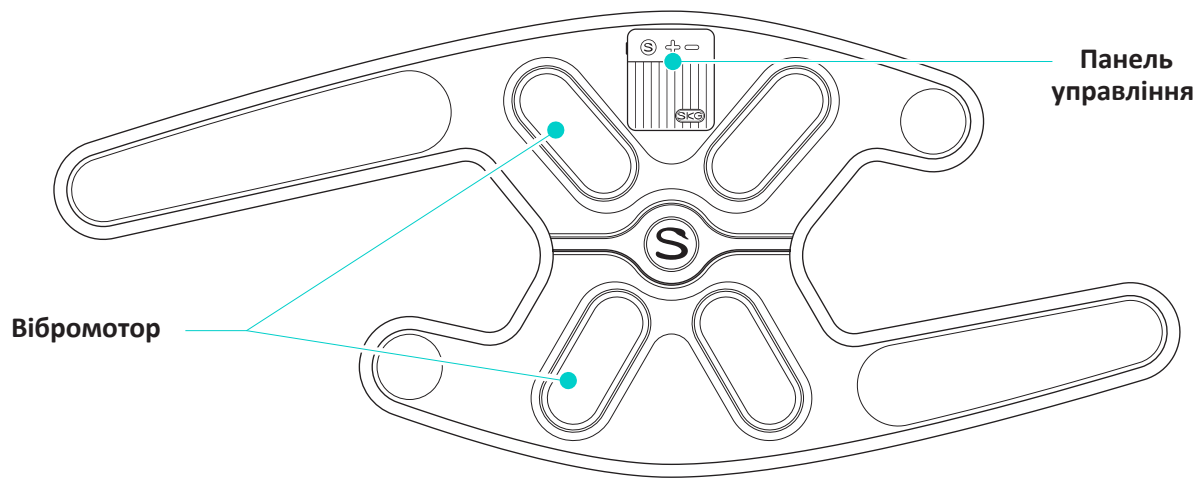

Кнопка увімкнення/вимкнення
(Довге натискання протягом 1.5 секунди)

Зміна режиму
(Коротке натискання протягом 0.5 секунди)

**Увімкнення/вимкнення
звукових повідомлень**
(Довге натискання протягом 1.5 секунди)

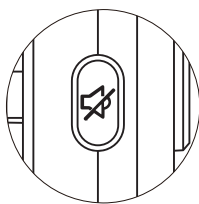


**Порт зарядки
Тип C**

**Індикатор рівня
заряду батареї**

Збільшення рівня тепла
(Коротке натискання протягом 0.5 секунди)

Зменшення/вимкнення тепла
(Коротке натискання протягом 0.5 секунди)

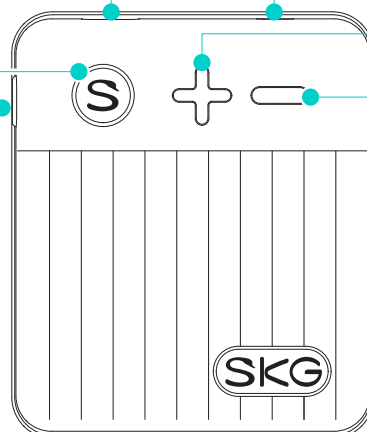

Інструкції щодо зарядки/живлення

Колір індикатора	Стан індикатора	Опис
Горить синім	Постійно горить	Увімкнений (коли батарея повністю заряджена)
Горить помаранчевим	Постійно горить	Коли рівень заряду недостатній
Горить помаранчевим	Блимає двічі	Батарея розрядилася
Горить помаранчевим	Блимає	Заряджається
Горить синім	Постійно горить	Повністю заряджений

Основні характеристики продукту

Назва продукту	Масажер для колін		
Модель	W3 Pro	Номінальна напруга зарядки	5В=
Ємність батареї	2000мА/г/ 7.4 Вт/г	Номінальна вхідна потужність	5 Вт

Примітка: Цей продукт можна перезаряджати, він сумісний з зарядкою Типу С. Користувачі повинні заряджати його за допомогою стандартного зарядного пристрою.

Режим експлуатації

	Режим експлуатації	Зберігання і транспортування
Інтервал температур	0°C~35°C	-20°C~50°C
Діапазон вологості	15%-90%RH	0%-90%RH
Атмосферний тиск	70КРА-106КРА	70 КРА -110КРА

Запобіжні заходи щодо утилізації продукту

Будь ласка, не нехуйте переробкою акумуляторних батарей (літій-іонних батарей)



Небезпека

Цей продукт містить акумуляторну батарею, яка не повинна використовуватись в інших продуктах. Не заряджайте батарею після вилучення.

- Не кидайте у вогонь і не піддавайте впливу високої температури.
- Не проколуйте цвяхами, не піддавайте впливу сильних ударів і не розбирайте.
- Не під'єднуйте позитивні та негативні клеми батареї безпосередньо до металу.
- Не зберігайте поряд з намистами, шпильками, тощо.
- Не зряджайте, не використовуйте і не зберігайте біля джерел високої температури, таких як плита, або пряме сонячне проміння.

Усі вищезазначені сценарії можуть призвести до перегріву, пожежі або вибуху.

Попередження

Покладіть вилучену акумуляторну батарею в недоступне для дітей місце для запобігання її випадковому ковтанню.

- У разі ковтання негайно зверніться до лікаря.
- У разі витоку рідини з батареї не торкайтеся рідини голими руками. Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій з безпеки:
- Існує ризик виникнення сліпоти, якщо рідина з батареї потрапить в очі. Не тріть очі руками. Негайно промийте чистою водою та зверніться до лікаря. Якщо рідина з батареї потрапить на тіло або одяг, це може викликати запалення або ушкодження шкіри. Промийте чистою водою та зверніться до лікаря, якщо дискомфорт не зникне.
- Розбирання дозволено лише після утилізації виробу. Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травм або інших нещасних випадків. Будь ласка, зверніться до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт, для ремонту (крім заміни батареї).

Літій-іонна батарея, яка використовується в цьому продукті, це цінний ресурс, який можна переробити. Перед утилізацією віддайте її професійній організації, яка займається переробкою акумуляторних батарей. Перш ніж викинути прилад, необхідно вилучити батарею і від'єднати прилад від мережі. Утилізуйте батарею правильно.

Етапи вилучення:

1. Будь ласка, відкрийте пластикову оболонку без кнопок за допомогою професійних інструментів.
2. Від'єднайте клеми батареї.
3. Вилучіть батарею.

Інструкції з усунення несправностей

Будь ласка, перевірте, чи виникали такі несправності, якщо продукт не працює належним чином. Якщо надані нами пропозиції не допоможуть вирішити проблему, поверніть виріб дилеру для ремонту.

1. Виріб для захисту колін не запускається.

Причина: Продукт досі під'єднаний до побутової розетки, батарея розряджена або на кнопку живлення натиснули недостатньо сильно.

Рішення: Витягніть кабель зарядки з пристрою; будь ласка, зарядіть пристрій; сильно натисніть на кнопку живлення, доки вона не стане на місце і ви не почувєте клацання.

2. Не світиться індикатор зарядки.

Причина: Кабель живлення Тип C не під'єднано до розетки належним чином.

Рішення: Будь ласка, під'єднайте кабель живлення Тип C2 до розетки належним чином.

3. Працює лише декілька хвилин, навіть після зарядки.

Причина: Строк служби батареї закінчився (приблизно 5 років)

Рішення: Будь ласка, зверніться до дилера (не проводьте заміну батареї самостійно)

4. Тіло не нагрівається.

Причина: Продукт може працювати неналежним чином при використанні за межами допустимого інтервалу температур навколишнього середовища.

Рішення: Використовуйте продукт в межах допустимого інтервалу температур навколишнього середовища від 0 до 35°C.

5. Під час роботи продукт вимикається.

Причина: Батарея розряджена; продукт автоматично вимикається через приблизно 20 хвилин.

Рішення: За необхідності зарядіть батарею.


Чищення та обслуговування

1. Догляд за основним блоком

За основним блоком необхідно ретельно доглядати; протирайте його м'якою тканиною.

2. Тканинна частина виробу

Тканинну частину неможна мити водою. Коли необхідно провести чищення чи обслуговування, використовуйте спирт для дезінфекції та видалення плям від поту або витріть чистим вологим рушником.

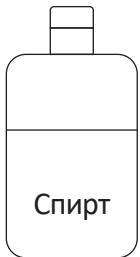

Запобіжні заходи

1. Час використання 20 хвилин на сеанс; будь ласка, оцініть стан свого коліна та відкоригуйте використання.
2. Рекомендовано використовувати «слабкий» режим, якщо ви вперше використовуєте цей продукт.
3. Якщо в ногах або в області колін ви відчуваєте біль, негайно припиніть використання продукту.
4. У разі виникнення під час використання будь-яких проблем зі шкірою або ногами, негайно припиніть використання цього продукту та зверніться до лікаря.
5. Рекомендовано не зловживати функцією масажу.
6. Під час використання цього продукту ваші коліна можуть тимчасово почервоніти. Це не є симптомом проблеми; якщо симптом не зникає, будь ласка, зверніться до хірурга-ортопеда.
7. Ремінці виробу можуть пошкодити панчохи під час носіння; будь ласка, зніміть панчохи перед використанням!
8. Поверхня може нагрітися при тривалому використанні; це нормально.

 **Попередження:** Неправильна робота може призвести до пов'язаних з цим небезпечних наслідків.

 **Примітка:** Неправильна робота може призвести до травм або пошкодження власності.

Попередження

1. В цьому продукті є функція гарячого компресу. Будь ласка використовуйте її лише через одяг, щоб уникнути низькотемпературних опіків під час використання функції гарячого компресу.
2. Не використовуйте функцію гарячого компресу цього продукту безперервно довше 30 хвилин, в іншому випадку це може спровокувати низькотемпературні опіки.

Запобіжні заходи щодо використання продукту

- Цей продукт містить літєву батарею. Не розбирайте, не вносьте зміни, не занурюйте у воду (контролер) і не кидайте у вогонь, оскільки це може пошкодити виріб.
- Якщо ви погано почуваєтеся через неправильну роботу цього продукту, негайно припиніть його використання. Зверніться до лікаря та виконуйте його вказівки, якщо помітите щось незвичне на тілі або шкірі.
- Не зберігайте в доступному для дітей та немовлят місці. Крім того, не дозволяйте дітям торкатися або використовувати прилад, оскільки це може призвести до опіків, ураження електричним струмом, або ушкодження тіла.

- Не пошкоджуйте, не вносьте зміни, не згинайте з силою або тягніть шнур живлення. Також не ставте важкі предмети на шнур живлення та не перетискайте його.
- Не використовуйте продукт у ванній кімнаті або душовій кабінці.
- негайно припиніть використання цього продукту, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт у шкірі чи інших частинах тіла.
- Під час чищення обов'язково від'єднайте адаптер від побутової розетки.
- Будь ласка, поведіться з пакуванням цього продукту належним чином, тримайте його подалі від немовлят і маленьких дітей.
- Не носіть основний блок під час будь-якої іншої діяльності.
- Не лягайте і не сідайте на виріб.
- Не піддавайте виріб впливу сильних ударів і навантажень.
- Не використовуйте виріб, накривши ковдрою або стьобаною ковдрою.
- Не використовуйте виріб під час сну.
- Поверхня приладу нагрівається, тому ті, хто нечутливий до тепла, повинні користуватися ним з обережністю.

Певні особи повинні використовувати прилад з обережністю

Особи з наведеними нижче захворюваннями повинні використовувати прилад з обережністю або під наглядом лікаря.

- Особи з розладами нервів ніг або порушенням чутливості шкіри.
- Люди з металевими, силіконовими або пластиковими матеріалами в коліні внаслідок переломів або ортопедичних операцій.
- Особи з розладами чутливості до тепла.
- Особи з пошкодженнями ніг або колін внаслідок дорожньо-транспортних пригод тощо.
- Особи, які мають або мали захворювання ніг (наприклад, травми сухожиль, деформації суглобів, переломи, варикозне розширення вен тощо).
- Люди з імплантованими електронними медичними пристроями, наприклад, кардіостимуляторами, на які легко впливають електромагнітні збої.
- Особи, у яких діагностовано втрату чутливості до температури.
- Особи, у яких діагностували злоякісні пухлини.
- Особи із захворюваннями серця.
- Особи на ранніх термінах вагітності або щойно після пологів.
- Особи з сенсорними порушеннями внаслідок діабету.
- Особи із шрамами на шкірі.
- Особи, яким необхідний відпочинок, та особи у поганому фізичному стані.
- Особи з остеопорозом, важкими переломами, розтягненнями, болем у м'язах або гострим (головним) болем.
- У разі підвищення температури тіла до 38°C (лихоманка)
- Особи з гострими запальними процесами, в тому числі, ознобом, змінами артеріального тиску та іншими важкими або ослабленими симптомами.
- Особи, які проходять лікування в медичних закладах.

Вимоги до зберігання

Будь ласка, тримайте цей продукт в недоступному для дітей місці, подалі від вологого середовища, високої температури, прямого сонячного проміння та бризок води. При невикористанні протягом тривалого часу, вимкніть живлення та заряджайте кожні два місяці.

Навколишнє середовище, необхідне для використання та зберігання

Використовуйте прилад при температурі від 0°C до 35°C та зберігайте прилад та аксесуари при температурі від -20°C до 50°C. У разі занадто високої або занадто низької температури можуть з'явитися збої в роботі.



Цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/35/EU.

УВАГА: РИЗИК ВИБУХУ, ЯКЩО ЗАМІНИТИ БАТАРЕЮ НА БАТАРЕЮ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЇ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ

Заяви про відповідність ЄС:

Заява про відповідність ЄС:

SKG Health technology Co.,Ltd. Цим засвідчує, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/35/EU.

Копію Декларації відповідності ЄС можна переглянути на сайті

<https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Старі електроприлади не можна викидати разом із залишками після переробки відходів, їх потрібно утилізувати окремо. Здача на комунальний пункт збору приватними особами безкоштовна. Власник старих приладів несе відповідальність за доставку приладів до цих або подібних пунктів збору. Такими незначними особистими зусиллями ви сприяєте переробці цінної сировини та обробці токсичних речовин.

Увага:

- Якщо у вас виникає подразнення шкіри при використанні масажеру для тіла, утримайтеся від його використання, або почекайте два-три дні і подивіться, чи пройдуть симптоми. Якщо симптоми не пройдуть, чи погіршаться, будь ласка, зверніться до лікаря.
- Якщо у вас екзема, алергія або астма, у вас може виникнути подразнення шкіри або алергія під час використання масажера.
- Прилад має використовуватись лише з безпечною наднизькою напругою, що відповідає маркуванню на приладі.
- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
- Діти не повинні грати з пристроєм.
- Діти не повинні чистити та проводити обслуговування приладу, якщо вони не перебувають під наглядом.



Перед використанням прочитайте інструкції

Головні примітки: Збережіть для подальшого використання



Не проштрикуйте шпильками.

- Якщо пристрій буде використовуватися протягом тривалого часу, наприклад, коли користувач спить, контролер необхідно налаштувати на рекомендовані налаштування для безперервного використання.
 - Не використовуйте у вологому стані.
 - Не використовувати особам, які не можуть доглядати за собою, немовлятам або особам, нечутливим до тепла.
 - Коли прилад не використовується, зберігайте, як описано у відповідному розділі (див. Вимоги до зберігання).
 - Дайте приладу охолонути перед тим, як покласти його на зберігання.
 - Не кладіть предмети на прилад під час зберігання, оскільки вони можуть спричинити ушкодження.
 - Регулярно перевіряйте прилад на ознаки зносу або пошкоджень. За наявності таких ознак, або якщо прилад неправильно використовувався, поверніть його постачальнику перед подальшим використанням.
 - Цей прилад не призначений для медичного використання в лікарнях.
- Діти не повинні використовувати цей прилад, якщо батьки або опікуни заздалегідь не налаштували його або не провели вичерпний інструктаж щодо його використання.