



### Запустіть та спробуйте його просто зараз

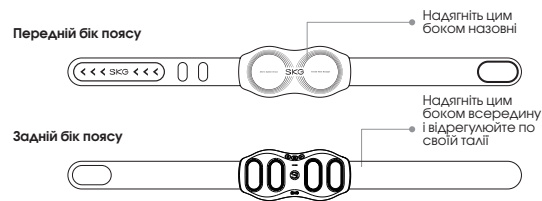

### Масажер

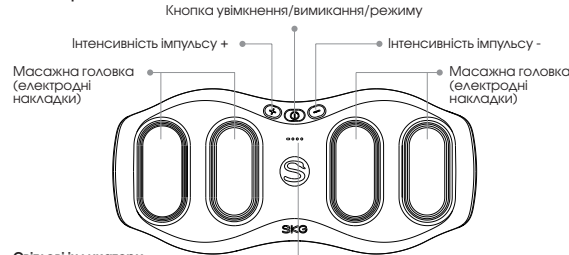

### Світлові індикатори

(світлові індикатори живлення)  
При повній зарядці всі 4 індикатора горять, а кількість білих індикаторів вказує на заряд акумулятора, що залишився;  
Якщо лише один індикатор лишився горіти червоним, це означає низький рівень заряду акумулятора, і рекомендується вчасно його зарядити;



### Інструкція з експлуатації

**Крок 1:** Після отримання виробу завантажте додаток Future Wear (ознайомтеся в додатку з процедурами інтелектуального керування). Якщо ви придбали пульт дистанційного керування, створіть сполучення та використовуйте його для керування ременем (інструкції з використання наведені на вкладиші до пульта дистанційного керування).;

**Крок 2:** Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимикання протягом 1,5 секунд, щоб увімкнути прилад. Після того, як електродні накладки нагріються, надіньте масажний пояс на талію, а потім затягніть пояс так, щоб електродні накладки масажної головки були щільно притиснуті до шкіри (якщо у вас суха шкіра, зволожите її перед надяганням поясу).;

**Крок 3:** Відкрийте мобільний додаток для інтелектуального керування, наприклад, інтенсивністю, режимом і рівнем інтенсивності гарячого компресу;

**Крок 4:** Зніміть пояс після використання.  
\* Вставляйте в такому напрямку:




### Інструкції щодо зарядки / живлення

№	Стан індикатора	Опис стану
1	Постійно горить білим	Заряд акумулятора, що залишився
2	Постійно горить червоним	Низький рівень заряду акумулятора
3	Блимає червоним	Надзвичайно низький рівень заряду акумулятора
4	Циклічно загоряється білим	Заряджання
5	Постійно горить білим	Повний заряд

### Основні параметри виробу

Назва виробу	Масажер для талії
Модель	W7Pro
Номинальна напруга зарядки	5 В постійного струму
Ємність акумулятора	2000 мА-год / 7,4 Вт-год
Номинальна вхідна потужність	10 Вт

### Регулярне обслуговування (пояс)

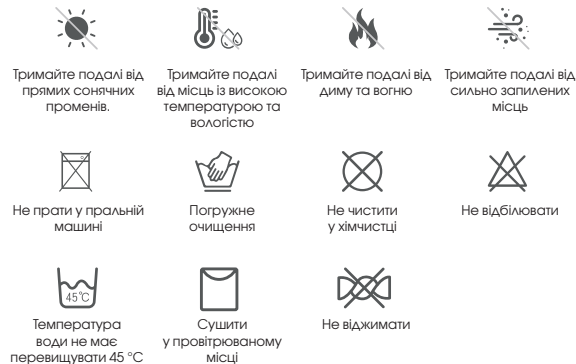

**Примітка:** Пояс можна прати, але масажер можна чистити тільки шляхом протирання.

### Додаток Future Wear

1 Завантажте додаток «Future Wear» в App Store або відскануйте QR-код.  
Ємність акумулятора



Google Play та логотип Google Play є товарними знаками Google Inc. Apple і логотип Apple є товарними знаками Apple Inc.



2. Зареєструйтеся та увійдіть у додаток



3. Увімкніть пристрій і Bluetooth на мобільному телефоні, а потім додайте пристрій у додатку «Future Wear».



**Не використовуйте та не зберігайте цей виріб у таких місцях:**

Місця під прямими сонячними променями • Місця з високою температурою та вологістю • Місця з водою • Запалені місця • Місця поблизу феєрверків • Місця з високою вірогідністю вібрації та ударів • Місця із сильними електромагнітними полями

### Умови використання

Використовуйте виріб при температурі від 0 °C до 35 °C та зберігайте масажер і приналежності до нього при температурі від -20 °C до +45 °C. Занадто висока або занадто низька температура навколишнього середовища може призвести до виходу масажера з ладу.

## Примітки щодо утилізації продукту

Підтримуйте вторинну переробку перезаряджуваних акумуляторних батарей (літій-іонних акумуляторів).

### ⚠ Застереження

Акумулятор у цьому виробі являє собою спеціальний перезаряджуваний акумулятор, не призначений для інших виробів. Не заряджайте знятий перезаряджуваний акумулятор.

- Не кидайте його у вогонь і не нагрівайте до високої температури.
- Не проколуйте його цвяхами, не давайте йому падати під дією сили тяжіння і не розбирайте, щоб модифікувати.
- Не з'єднуйте між собою позитивний та негативний полюси акумулятора за допомогою металевих предметів.
- Не зберігайте його разом із намістом, шпильками для волосся тощо.
- Не заряджайте, не використовуйте і не залишайте його в місцях з високою температурою, наприклад, біля каміну або під палочим сонцем.
- Описані вище ситуації можуть призвести до нагрівання, займання та поломки.

### ⚠ Попередження

- Зберігайте знятий перезаряджуваний акумулятор в недоступному для немовлят і маленьких дітей місці, щоб дитина випадково не проковтнула його.
- При випадковому проковтуванні пристрою негайно зверніться до лікаря
- При витоку рідини з акумулятора не торкайтеся рідини руками, а вчиняйте з нею наступним чином.
- Якщо електроліт з акумулятора потрапив в очі, не тріть очі руками, щоб не втратити зір. Негайно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. При потрапленні електроліту акумулятора на тіло або одяг можлива поява подразнення шкіри або травмування. Промийте водою. Якщо ви все одно відчуваєте дискомфорт, негайно зверніться до лікаря.
- Розбирати можна лише викинуті вироби. В іншому разі це може призвести до загоряння, ураження електричним струмом чи травмування. Якщо необхідно відремонтувати акумулятор (не замінюючи його), зверніться до дилера, в якого ви придбали цей виріб.

Літій-іонний акумулятор, який використовується в цьому виробі, є цінним ресурсом, який можна переробити. Тому, коли він вийде з ужитку і буде утилізований, передайте його до професійної організації, яка здатна переробляти утилізовані акумуляторні батареї. Перед утилізацією з масажера необхідно виїняти акумулятор. Перед вийманням акумулятора масажер необхідно вимкнути. Акумулятор слід утилізувати безпечним чином.

**Кроки для вилучення акумулятора:**
За допомогою професійних інструментів зніміть пластиковий корпус без кнопок;
Зніміть клею підключення вихідного кабелю акумулятора;
Вийміть акумулятор.

## Запобіжні заходи

### ⚠ Застереження

- В жодному разі не використовуйте виріб при наявності наступних медичних електронних пристроїв, щоб уникнути несприятливого впливу та можливих травм** - Імплантовані електронні медичні пристрої, такі як кардіостимулятори - Електронні медичні пристрої підтримки життєдіяльності, такі як апарат штучного кровообігу - Електронні медичні пристрої, такі як електрокардіографи
- Не використовуйте масажер на бензинових автозаправних станціях, у сильно запилених цехах, на газових автозаправних станціях та в інших вогне- та вибухо-небезпечних приміщеннях**

### ⚠ Попередження

- Пацієнт, який одночасно використовує високочастотний хірургічний пристрій і масажер, може отримати опіки в місці розташування електродних накладок: крім того, так можна пошкодити масажер
- Якщо виріб використовується поблизу (на відстані 1 метр від) обладнання для короткохвильової або мікрохвильової терапії, потужність масажера може бути нестабільною
- Під час масажу уникайте контакту електродних накладок з ранами та шрамами
- Під час масажу не розміщуйте електродні накладки біля серця на грудній клітині, оскільки це збільшує ризик фібриляції серця
- Виріб рекомендований для використання одним користувачем. Якщо виробом користуються кілька користувачів, перед використанням очистіть електродні накладки на виробі
- При використанні виробу електродні накладки повинні щільно прилягати до шкіри для забезпечення рівномірного контакту.
- Цей виріб має функцію нагріву, яка при тривалому увімкненні (більше 20 хвилин) на одній і тій самій ділянці тіла може призвести до низькотемпературних опіків.
- Припиніть використання, якщо відчуваєте себе погано під час або після використання, і зверніться до лікаря.
- Цей виріб містить літєвий акумулятор. Не розбирайте, не модифікуйте, не за-нуруйте у воду і не кидайте у вогонь, інакше виріб може пошкодитися й вибухнути.
- Не використовуйте виріб поблизу серця, над шиєю, на голові, в роті, на статевих органах або на поверхні шкіри зі шкірними захворюваннями і не масажуйте підощви обох ніг одночасно
- Крім того, не використовуйте цей виріб для стиснення внутрішніх органів.

Недотримання цієї вимоги може призвести до нещасних випадків або фізичного дискомфорту.

- Не застосовуйте з іншими медичними приладами і не користуйтеся більш ніж 2 комплектами даного виробу одночасно, оскільки це може викликати нудоту або фізичний дискомфорт.
- Не використовуйте пристрій для цілей, відмінних від описаних у посібнику користувача, в іншому випадку можливі нещасні випадки та несправності.
- Не використовуйте електродні накладки зі сколами або пошкодженими поверхнями, в іншому випадку можуть статися нещасні випадки і виникнути несправності.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте виріб без попереднього дозволу, оскільки це може призвести до несправностей або ураження електричним струмом.

**У наступних випадках перед використанням проконсультуйтеся з лікарем. Недотримання цієї вимоги може призвести до нещасних випадків або фізичного дискомфорту.**

- Пацієнти, які проходять лікування у лікаря і не відчувають себе нормально
- Пацієнти з інфекційними захворюваннями
- Пацієнти з патологіями серця і мозкових нервів
- Пацієнти з порушеною чутливістю шкіри або аномаліями шкірних покривів
- Пацієнти з температурою понад 38 градусів (період лихоманки)
- Пацієнти, які приймають ліки
- Особи зі шкірою, чутливою до графену / графіту
- Пацієнти з аномальним артеріальним тиском
- Пацієнти, не здатні до висловлювання своїх відчуттів
- Пацієнти з дисфункцією периферичного кровообігу високого рівня, спричиненою (наприклад) цукровим діабетом

**Використання цього виробу заборонено при наступних обставинах:**

- Пацієнти зі злоякісними новоутвореннями
- Пацієнти з коагулопатією
- Вагітні жінки, породіллі
- Пацієнти зі спастичністю внаслідок порушення мозкового кровообігу
- Користувачі кардіостимуляторів
- Поруч із серцем
- Люди з важкими когнітивними порушеннями
- Пацієнти зі схильністю до кровотеч
- Пацієнти з гострим гнійним запаленням
- Очі
- Пацієнти з металевими імплантатами
- Нейростресори з нервовою збудливістю
- Пацієнти зі спастичним паралічем
- Протягом півгодини після прийому їжі

- Люди з неясною свідомістю, деформацією кісток кінцівок та контрактурою суглобів
- Виріб не можна використовувати на талії і нижній частині живота у вагітних на ранніх термінах вагітності

### ⚠ Примітка

- Перед використанням виробу прочитайте посібник користувача.
- Якщо ви почуваєтєся погано через несправність даного виробу, негайно припиніть його використання. Якщо ви відчуваєте дискомфорт у тілі або на шкірі, проконсультуйтеся зі своїм лікарем і дотримуйтеся його вказівок.
- Якщо ви хочете перемістити електродні накладки або передати пристрій іншій людині під час масажу, перед переміщенням обов'язково вимкніть живлення, в іншому випадку можна зазнати сильного ураження електричним струмом
- Не накладайте електродні накладки на черепно-мозкову область у пацієнтів з порушеннями мозкового кровообігу в анамнезі
- Не робіть масаж, якщо маєте надягнені електронні пристрої. Невиконання цієї вимоги може призвести до некоректного функціонування електронного пристрою (наприклад, електронні годинники виходять з ладу).
- У разі ненормального стану, коли виріб не може працювати, негайно відключіть живлення та зніміть виріб, інакше можливі його перегрівання або коротке замикання, а в разі нещасного випадку зверніться до нашої служби обслуговування клієнтів за консультацією з післяпродажного обслуговування.
- Не підключайте та не від'єднуйте USB-кабель для зарядки мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або нещасних випадків.
- Не використовуйте виріб на дітях або тих, хто не має здатності свідомо висловлювати свої думки, оскільки це може призвести до нещасних випадків або фізичного дискомфорту.
- Не використовуйте виріб у місцях з підвищеною вологістю, наприклад, у ванній кімнаті, і не використовуйте його під час купання, оскільки це може призвести до сильного ураження електричним струмом та пошкодження виробу.
- Не використовуйте масажер під час сну, інакше може виникнути несправність масажера, а електродні накладки можуть переміститися на інші частини тіла, що може викликати фізичний дискомфорт.
- Не використовуйте виріб під час водіння автомобіля, в іншому випадку через надмірну стимуляцію може виникнути фізичний дискомфорт, який може призвести до нещасного випадку.
- Не прикладайте електродні накладки до ураженої ділянки на тривалий час, оскільки це може викликати запалення шкіри.
- Слідкуйте за тим, щоб металеві деталі ременів, намиста тощо не торкалися електродних накладок під час масажу, оскільки це може призвести до сильного ураження електричним струмом.
- При використанні функції масажу не застосуйте її на одній і тій самій ділянці протягом тривалого часу (більше 30 хвилин), в іншому випадку може виникнути

- відчуття фізичного дискомфорту через втому м'язів в області масажу.
- Надягайте виріб правильно і симетрично навколо талії, в іншому випадку можуть статися нещасні випадки або виникнути відчуття фізичного дискомфорту.
- Від'єднуючи USB-кабель для зарядки від масажера, не тягніть за кабель, а візьміть-ся за вилку кабелю і витягніть її, в іншому випадку можливі ураження електричним струмом або пошкодження виробу.
- Електродні накладки виробу мають нагрівальну поверхню, і користувачі, нечутливі до нагрівання, повинні бути обережними при використанні даного виробу.
- Нагрівання поверхні виробу після його тривалої експлуатації є нормальним.
- Перед використанням переконайтеся, що кнопки масажера працюють належним чином
- При першому використанні або після того, як виріб не використовувався протягом тривалого часу, зарядьте акумулятор відповідно до посібника користувача, щоб забезпечити його нормальну роботу.
- Утилізуйте виріб відповідно до чинних правил охорони навколишнього середовища у вашому місті, в іншому випадку може статися забруднення навколишнього середовища.
- Рекомендується для використання особами від 16 років і старше.
- Для збереження здоров'я ваших очей не опромінюйте їх інфрачервоним світлом протягом тривалого часу.



Старі електроприлади не можна утилізувати разом із побутовими відходами, їх необхідно утилізувати окремо. Утилізація в комунальному пункті збору через приватних осіб здійснюється безкоштовно. Власник старої побутової техніки несе відповідальність за доставку побутової техніки до цих або подібних пунктів збору. Доклавши невеликих особистих зусиль, ви робите свій внесок у переробку цінної сировини та очищення токсичних речовин.

#### Обережно!

- Якщо ви відчуваєте подразнення шкіри під час застосування масажера тіла, утримайтеся від його використання та зачекайте дво-три дні, щоб поборити, чи послабляється у вас симптоми. Якщо симптоми зберігаються або погіршуються, зверніться до терапевта.
- Якщо ви страждаєте на екзему, алергію або астму, зростає вірогідність появи подразнення шкіри або алергії від застосування масажера.

- Прилад необхідно живити лише безпечною наднизькою напругою, що відповідає маркуванню на приладі.
- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Діти не повинні грати з приладом.
- Не дозволяйте дітям провадити чищення та технічне обслуговування пристрою без нагляду дорослих.