



SKG

Масажний пістолет X7-E

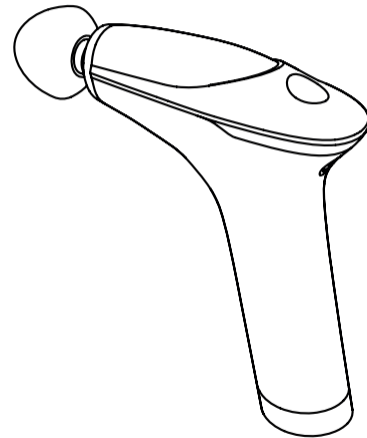

Завантажтеся, щоб випробувати

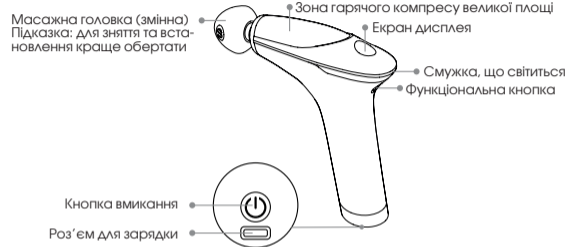

Масажна головка				
Назва	Лопатоподібна головка	Кульова головка	Куля	U-подібна головка
Ударна сила	•••••	•••	•••••	••••
Опис	Тверда текстура, відносно велика ударна сила, підходить для розслаблення гладких м'язів усього тіла, в тому числі трапецієподібного м'язу, стегна, литок, рук тощо.	М'яка текстура, помірна ударна сила, підходить для розслаблення деяких м'язів всього тіла.	Тверда текстура і найбільша ударна сила, підходить для інтенсивного часткового глибокого розслаблення після тренування.	М'яка текстура, підходить для трапецієподібного м'язу, обох сторін хребта, литок тощо.

Інструкція з експлуатації



Вмикання/вимикання та інші робочі стани
Щоб увімкнути/вимкнути, натискайте кнопку вмикання/вимикання протягом 1,5 с



Перемикач режимів
За замовчуванням після запуску встановлюється ударний режим (1 швидкість), після тривалого натискання функціональної кнопки перемикається на режим гарячого компресу



Перемикач швидкості
Коротко натисніть на функціональну кнопку для перемикання швидкості після переходу у відповідний режим (нейтральна швидкість - це стан очікування)

Світловий індикатор		
Індикатор	Стан відображення	Опис
Індикаторна лампа живлення	Постійно світить синім	Нормальна подача живлення
Індикаторна лампа живлення	Постійно світить помаранчевим	Низький рівень заряду
Індикаторна лампа живлення	Блимає помаранчевим	В процесі зарядки
Індикаторна лампа живлення	Помаранчевий індикатор блимає 5 разів	Нестача: відключення
Індикаторна лампа живлення	Блимає синім	Повний заряд

Запуск і відключення		
Індикатор	Стан відображення	Опис
Усі світлові індикатори	Горять протягом 1,5 секунд перед переходом в ударний режим	Запуск
Усі світлові індикатори	Нічого не відображається	Відключення

Режим гарячого компресу		
Індикатор	Стан відображення	Опис
Індикаторна лампа гарячого компресу	Постійно горить червоний індикатор	Запускається режим гарячого компресу
Світловий індикатор 1 швидкості	Відповідна швидкість	Відображення швидкості
Світловий індикатор 2 швидкості	Відповідна температура	Відображення температури швидкості

Ударний режим		
Індикатор	Стан відображення	Опис
Смужка, що світиться	Постійно горить синій індикатор	Ударний режим
Світловий індикатор 1 швидкості	Увімкнена відповідна швидкість	Відображається швидкість
Світловий індикатор 2 швидкості	Відповідна швидкість	Відображається швидкість

Повідомлення про ненормальний стан

- У електромотора «F1» заблокований ротор. Обладнання відключається в разі блокування ротора протягом 3-х послідовних циклів.
- Електромотор «F2» перегрітий. Обладнання відключається, якщо світлова смужка блимає протягом 3 секунд.

Технічні параметри

Назва пристрою	X7-E	Модель	S1216HA
Ємність акумулятора	1800 мА-год	Розміри	224*199*70 мм
Номінальна вхідна потужність	20 Вт	Номінальна вхідна напруга	5 В постійного струму
Спосіб зарядки	Зарядний пристрій з роз'ємом Type-C		

Щоденне технічне обслуговування приладу



Уникайте прямих сонячних променів



Уникайте високої температури та вологості



Уникайте близькості до вогню



Уникайте попадання пилу

Примітки щодо утилізації продукту

Підтримуйте вторинну переробку перезаряджуваних акумуляторних батарей (літій-іонних акумуляторів).

⚠ Застереження

Акумулятор у цьому виробі являє собою спеціальний перезаряджуваний акумулятор, не призначений для інших виробів. Не заряджайте знятий перезаряджуваний акумулятор.

- Не кидайте його у вогонь і не нагрівайте до високої температури.
- Не проколюйте його цвяхами, не давайте йому падати під дією сили тяжіння і не розбирайте, щоб модифікувати.
- Не з'єднуйте між собою позитивний та негативний полюси акумулятора за допомогою металевих предметів.
- Не зберігайте його разом із намистом, шпильками для волосся тощо.
- Не заряджайте, не використовуйте і не залишайте його в місцях з високою температурою, наприклад, біля каміну або під палючим сонцем.
- Описані вище ситуації можуть призвести до нагрівання, займання та поломки.

⚠ Попередження

Зберігайте знятий перезаряджуваний акумулятор в недоступному для немовлят і маленьких дітей місці, щоб дитина випадково не проковтнула його.

- При випадковому проковтуванні пристрою негайно зверніться до лікаря
- При витоку рідини з акумулятора не торкайтеся рідини руками, а вчиняйте з нею наступним чином.
- Якщо електроліт з акумулятора потрапив в очі, не тріть очі руками, щоб не втратити зір. Негайно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. При потраплянні електроліту акумулятора на тіло або одяг можлива поява подразнення шкіри або травмування. Промийте водою. Якщо ви все одно відчуваєте дискомфорт, негайно зверніться до лікаря.
- Розбирати можна лише викинуті вироби. В іншому разі це може призвести до згоряння, ураження електричним струмом чи травмування. Якщо необхідно

відремонтувати акумулятор (не замінюючи його), зверніться до дилера, в якого ви придбали цей виріб.

Літій-іонний акумулятор у цьому виробі є цінним ресурсом, який можна переробити та використати повторно, але ставити його на місце не можна. Передайте його професійному агентству, яке зможе переробити акумуляторну батарею, після того, як цей виріб буде викинуто. Перед викиданням цього виробу вийміть з нього акумулятор. Перед вийманням акумулятора прилад необхідно вимкнути. Слід безпечно утилізувати акумулятор, для цього його необхідно вийняти, виконавши наступні дії:

- За допомогою професійних інструментів зніміть верхню та нижню частини корпусу.
- Зніміть друковану плату та електромотор.
- Вийміть акумулятор, обріжте дріт акумулятора професійними плоскогубцями, а потім вийміть акумулятор.

Запобіжні заходи

🚫 Протипоказання

- Не застосовується до онкологічних хворих
- Не застосовується до пацієнтів, яким проводиться внутрішня фіксація металевою кістковою голкою (не застосовується безпосередньо в області перелому)
- Не застосовується до пацієнтів з остеопорозом
- Не застосовується до пацієнтів з ішемічною хворобою серця
- Не застосовується до пацієнтів з венозним тромбозом і венозним пульсом
- Не застосовується до пацієнтів із захворюваннями серця та гіпертонією
- Вагітним жінкам застосовувати з обережністю (не застосовувати у частковій дозі на області живота)
- Пацієнтам з каменями в нирках застосовувати з обережністю (не застосовувати в області, близькій до області нирок)
- Не застосовується до пацієнтів з розширенням вен
- Не застосовується до пацієнтів із гострим запаленням
- Не застосовується до колінної чашечки, великогомілкової кістки, плеснової кістки та інших ділянок кісток

- Не застосовується безпосередньо на хребті
- Не застосовується безпосередньо на шийному відділі хребта
- Не застосовується безпосередньо на лицьових м'язах
- Не застосовується до користувачів медичних електронних приладів, імплантованих в організм, таких як кардіостимулятори
- Не застосовується до користувачів в стані голоду, ситості або сп'яніння
- Тривалість застосування в одній і тій самій області повинна становити не більше 5 хвилин
- Інші пацієнти з травмами шийного та поперекового хребців повинні дотримуватися порад лікаря
- Прилад має нагрівальну поверхню. Особи, нечутливі до нагрівання, повинні бути обережними при використанні приладу.

📍 Сфера застосування

- Застосовується для розслаблення до і після фізичного тренування
- Застосовується для реабілітаційного тренування
- Використовується для полегшення болю у м'язах і фасціальної втоми
- Допомагає у фізичному тренуванні
- Сприяє розслабленню міофасціальної оболонки та покращує пластичність м'яких тканин

⚠ Застереження

- Не користуйтеся приладом під час заряджання

Запобіжні заходи з техніки безпеки

- Цей виріб не рекомендується прикладати безпосередньо до поверхні шкіри в разі пошкодження шкіри. Область масажу повинна бути покрита сухим і чистим одягом або чистим і сухим рушником. Обережно натискайте на прилад і пересувайте його
- Режим високої швидкості і високого тиску можна застосовувати лише до м'яких

- тканин тіла, а не до голови й кісток, за умови відсутності болю та дискомфорту
- Часте застосування приладу на одній і тій самій ділянці з високою швидкістю і високим тиском може призвести до утворення синців; при появі болю чи дискомфорту негайно припиніть його використання
- Телескопічну частину приладу слід тримати подалі від пальців, волосся або волосків на будь-якій частині тіла, щоб уникнути защемлення і травм
- Не викидайте цей виріб і не зловживайте ним
- Не модифікуйте виріб без дозволу
- Не запускайте і не заряджайте прилад, залишений без нагляду
- Цей виріб призначений тільки для дорослих
- Особи, зазначені в протипоказаннях, повинні використовувати цей продукт з дозволу лікаря

Примітки

- Перед запуском пристрою переконайтеся, що перед масажною головкою немає перешкод. Якщо вона заблокована зовнішньою силою, прилад ненадовго зупиниться і спробує запуститися знову
- Цей виріб не є водонепроникним. Зберігайте його подалі від води та інших рідин
- Не розбирайте весь апарат. Якщо через недбале розбирання виникає якась несправність, відправте виріб назад для повторного налагодження. Усі витрати, що випливають із цього, несе користувач
- Тривала безперервна робота може призвести до підвищення температури поверхні електромотора, експлуатуйте його з увагою та обережністю
- Категорично забороняється дозволяти виробу падати або стикатися з ним; це може призвести до його пошкодження та некоректного функціонування. У разі поломки через падіння або зіткнення, своєчасно звертайтеся до відділу післяпродажного обслуговування



Старі електроприлади не можна утилізувати разом із побутовими відходами, їх необхідно утилізувати окремо. Утилізація в комунальному пункті збору через приватних осіб здійснюється безкоштовно. Власник старої побутової техніки несе відповідальність за доставку побутової техніки до цих або подібних пунктів збору. Доклавши невеликих особистих зусиль, ви робите свій внесок у переробку цінної сировини та очищення токсичних речовин.

Якщо ви відчуваєте дискомфорт або подразнення шкіри при носінні смарт-годинника, рекомендуємо спробувати почистити ваш пристрій. Іноді на пристрої накопичуються залишки або сторонні речовини, які можуть подразнювати шкіру. Можливо також, що ви неправильно носите годинник. Рекомендуємо регулярно чистити і налаштовувати ваш годинник, щоб було зручніше його носити.

Обережно!

- Якщо ви відчуваєте подразнення шкіри під час носіння годинника, утримайтеся від його носіння та зачекайте два-три дні, щоб побачити, чи послабляться у вас симптоми. Якщо симптоми зберігаються або погіршуються, зверніться до терапевта.
- Якщо у вас екзема, алергія або астма, у вас може бути більшою вірогідність подразнення шкіри або алергії на пристрій, який ви носите.

* Прилад необхідно жити лише безпечною наднизькою напругою, що відповідає маркуванню на приладі. Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструковані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
* Діти не повинні грати з приладом.
* Не дозволяйте дітям проводити чищення та технічне обслуговування пристрою без нагляду дорослих.