



SKG

Масажер для шиї
K5-3Pro

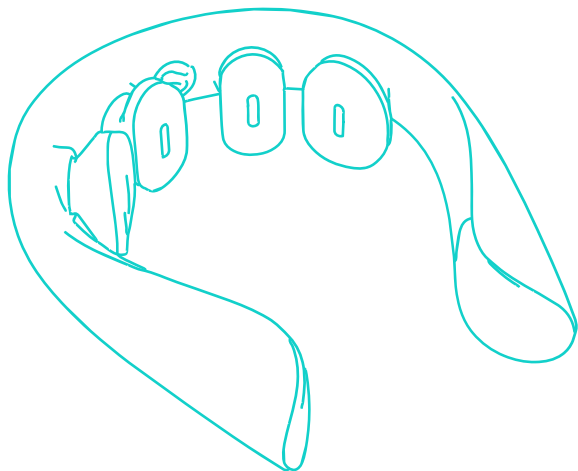

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Насолоджуйтеся процесом увімкнення

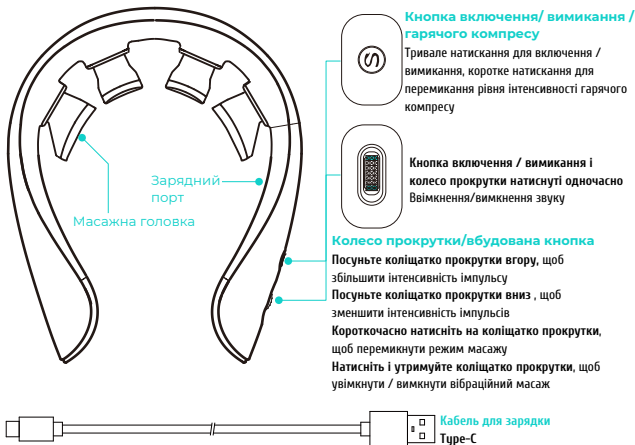

* Малюнки і схеми, наведені в цьому посібнику, наведені виключно в якості ілюстрації і можуть відрізнятися за зовнішнім виглядом від реального виробу.

Інструкції щодо зарядки / Джерела живлення

Стан індикаторних лампочок	Значення
Суцільне синє світло без підключення до зовнішнього джерела живлення USB	Рівень заряду батареї в нормі, і масажер включений
Суцільне помаранчеве світло без підключення до зовнішнього USB-джерела живлення	Батарея розряджена, і масажер включений
Блимає помаранчевим світлом без підключення до зовнішнього USB-джерела живлення	Масажер вимикається при низькому заряді акумулятора, блимає помаранчевим світлом, поки масажер не вимкнеться
Блимає помаранчевим світлом при підключенні до зовнішнього USB-джерела живлення	Зарядка
Блимає синім світлом при підключенні до зовнішнього USB-джерела живлення	Повністю заряджений


Основні параметри виробу

Модель	K5-3Pro	Ном. вхідна напруга	5В ---
Місткість акумулятора	1000 мАг / 3,7 Вг	Ном. вхідна потужність	5Вт

Спосіб носіння

*Щільно притуляйте до шкіри

*Змочіть шкіру вологою серветкою перед використанням

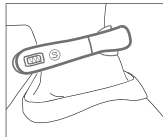

Щоденне технічне обслуговування виробу

- Уникайте попадання прямих сонячних променів
- Уникайте високих температур і вологості
- Уникайте знаходження поблизу відкритого вогню
- Тримайте якомога далі від твердих предметів, уникайте ударів і не дряпайте.
- Зовнішню поверхню пристрою можна чистити вологою або м'якою ганчіркою.
- Рекомендується заряджати акумулятор раз на місяць, якщо він не використовується протягом тривалого періоду часу, і тримати його повністю зарядженим під час використання



Інструкції з усунення несправностей

Якщо виріб не працює належним чином, перевірте наявність наступних умов. Якщо наші поради не допоможуть усунути проблему, поверніть виріб дилеру для ремонту.

Стан	Можлива причина	Рішення
Не вдається запустити	Низький рівень заряду батареї	Зарядіть пристрій
	Пристрій не включено	Тривале натискання кнопки живлення для ввімкнення
	Виріб все ще підключено до побутової розетки	Від'єднайте кабель для зарядки від пристрою
Не вдається виконати зарядку або індикатор зарядки не відображається	Зарядний кабель неправильно вставлений в розетку живлення	Під'єднайте зарядний кабель
	Використаний неправильний зарядний кабель	Використовуйте кабель з роз'ємом Type-C

Заходи з утилізації продукту

Будь ласка, підтримайте ідею переробку акумуляторних батарей (літій-іонних батарей

 <p>Небезпека</p>	<p>Акумулятор цього виробу – це спеціальна акумуляторна батарея, яку не можна використовувати в інших виробках. Не заряджайте акумулятор після його виймання.</p> <ul style="list-style-type: none">• Не кидайте у вогонь і не піддавайте надмірному нагріванню.• Не проколювати цвяхами, не піддавати сильним ударам і не розбирати• Не підключайте безпосередньо позитивні та негативні клеми акумулятора до металевих• Не зберігайте його разом з намистами, шпильками для волосся тощо.• Не заряджайте, не використовуйте і не зберігайте в місцях з високою температурою, наприклад, біля плити або під прямими сонячними променями
 <p>Попередження</p>	<p>Щоб запобігти випадковому проковтуванню, зберігайте вийняту акумуляторну батарею в недоступному для дітей місці.</p> <ul style="list-style-type: none">• При ковтанні негайно зверніться до лікаря.• Якщо акумулятор протікає, не торкайтеся рідини голими руками.• Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій з техніки безпеки:• Існує ризик сліпоті, якщо рідина з акумулятора потрапляє в очі. Не тріть око руками. Негайно промити чистою водою і звернутися до лікаря. Якщо рідина з акумулятора потрапить на тіло або одяг, це може спричинити запалення шкіри або травму. Промийте шкіру чистою водою, а якщо дискомфорт не минає, негайно зверніться до лікаря.• Розбирання дозволяється тільки в разі утилізації виробу. Недотримання цього правила може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травм або інших нещасних випадків. З питань ремонту (за винятком заміни акумулятора) звертайтеся до продавця, у якого ви придбали виріб.

Літійово-іонна батарея, яка використовується в цьому виробі, є цінним ресурсом, що підлягає вторинній переробці. Будь ласка, вийміть літійово-іонну батарею перед утилізацією та передайте її в професійну організацію, яка займається переробкою та утилізацією акумуляторних батарей.

- Перед утилізацією пристрою необхідно вилучити з нього акумулятор.
- Перед вийманням акумулятора пристрій має бути вимкненим.
- Батарею слід утилізувати безпечним способом.

Етапи вилучення:

1. Відкрийте корпус за допомогою інструменту.
2. Відкрутіть гвинти на друкованій платі.
3. Від'єднайте штекер клеми акумулятора.
4. Вийміть акумулятор.



Обережно

Щоб зменшити його вплив і можливу шкоду, не використовуйте виріб з наступними медичними електронними пристроями:

- Імплантовані медичні електронні пристрої, такі як кардіостимулятори.
- Медичні електронні пристрої, що підтримують життя, такі як штучні серця та легені.
- Медичні електронні пристрої, такі як електрокардіографи.
- Заборонено використовувати в легкозаймистих і вибухонебезпечних зонах, таких як заправні станції, майстерні з високим рівнем запиленості та автозаправні станції.
- Цей виріб не є обладнанням і не діагностує та не лікує захворювання шиї. Пацієнтам із захворюваннями шиї слід проконсультуватися з фахівцями, щоб уникнути затримки з лікуванням.
- Не використовуйте цей виріб під час керування автомобілем, підйому на висоту або інших небезпечних видів діяльності, оскільки це може призвести до нещасних випадків.
- Не використовуйте біля серця, над шиєю, головою, ротом, геніталіями, а також при шкірних захворюваннях і уникайте одночасного масажування обох підшов ніг.
- Тривалість гарячого компресу для цього продукту не повинна перевищувати 15 хвилин (будь ласка, уточнюйте час), оскільки існує ризик низькотемпературних опіків. Не використовуйте під час сну або в несвідомому стані, а користувачам, чутливим до тепла, слід використовувати нижчу температуру і суворо контролювати час використання.
- Особи з порушеннями кровообігу, такими як захворювання судин головного мозку, запалена або набрякла шкіра шиї, нагноєння або захворювання, пов'язані з шиєю, не повинні використовувати цей продукт, оскільки він може погіршити симптоми.
- Зберігайте цей виріб у місцях, недоступних для немовлят, дітей або осіб, які повністю або частково втратили свідомість. Не дозволяйте їм користуватися ним, оскільки це може призвести до нещасних випадків.
- Особам старше 70 років заборонено користуватися цим пристроєм. Будь ласка, виберіть нижчий рівень і суворо контролюйте тривалість використання, оскільки люди старше 65 років мають більш ніжну шкіру і менш чутливі нервові закінчення.
- Поступово збільшуйте налаштування масажу відповідно до особистого комфорту, інакше дискомфорт від більш високих налаштувань може викликати м'язове напруження.



Попередження

- Це масажний виріб для особистої гігієни і не може використовуватися замість ліків або медичних пристроїв.
- Дітям, вагітним жінкам і жінкам під час менструації заборонено використовувати цей виріб.
- Містить літєву батарею. Не надавайте його впливу високих температур.
- Використовуйте цей пристрій під наглядом лікаря, якщо у вас чутлива шкіра, алергічний дерматит на обличчі або на ділянках обличчя, що містять косметичні матеріали.
- Користувачі з алергією на метал або тепло повинні бути обережними.
- Цей продукт має функцію нагрівання; будьте обережні, якщо ви нечутливі до тепла.

- Якщо під час використання виникає дискомфорт, будь ласка, негайно припиніть використання.
- Не розбирайте цей виріб самостійно.
- Не намагайтеся самостійно замінити акумулятор.
- Якщо у вас є травма шиї, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати цей пристрій.
- Пристрій має нагрівальну поверхню, тому люди з підвищеною чутливістю до тепла повинні бути обережними під час його використання.
- Використовувати у звичайному робочому середовищі: Температура: 0°C до 40°C; Відносна вологість: <80%Н, без конденсації; Атмосферний тиск: від 50 кПа до 106 кПа.
- Будь ласка, обирайте нормальні умови транспортування та зберігання: Діапазон температур: від -20 С до +55°C; Діапазон відносної вологості: <95% ВВ, без конденсації; Атмосферний тиск: від 50 кПа до 106 кПа.
- Цей продукт містить літієву батарею. Не розбирайте, не модифікуйте, не занурюйте у воду і не піддавайте впливу відкритого вогню, оскільки це може призвести до пошкодження або вибуху.
- Не натискайте на серце під час використання, оскільки це може спричинити нещасний випадок або фізичний дискомфорт.
- Не використовуйте цей виріб з медичними пристроями або з більш ніж двома пристроями одночасно, оскільки це може викликати нудоту або фізичний дискомфорт.
- Не використовуйте для цілей, відмінних від зазначених в інструкції, оскільки це може призвести до нещасних випадків.
- Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте цей виріб самостійно, оскільки це може призвести до несправності або ураження електричним струмом.
- Не використовуйте для масажу інших частин тіла, окрім шиї.
- Якщо пацієнт одночасно використовує високочастотне хірургічне обладнання та цей масажер, це може призвести до опіків у місці розташування електродів масажера, а також до пошкодження масажера.
- Якщо цей виріб використовується поблизу короткохвильового або мікрохвильового терапевтичного обладнання (в межах 1 метра), потужність цього масажера може бути нестабільною.
- Під час масажу слід уникати контакту електродів з ранами та шрамами.
- Під час масажу електродні накладки не можна розміщувати поблизу серцевої ділянки грудної клітки, оскільки це може збільшити ризик виникнення фібриляції серця.

У наступних ситуаціях, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням, інакше можуть виникнути нещасні випадки або дискомфорт

- Пацієнти, які перебувають на лікуванні та відчувають ненормальні фізичні симптоми.
- Пацієнти з інфекційними захворюваннями.
- Пацієнти з алергією на електроди з нержавіючої сталі.
- Пацієнти з патологіями серця або нервів головного мозку.
- Пацієнти з порушеннями чутливості або аномаліями шкіри.
- Пацієнти з температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм (під час лихоманки).
- Пацієнти, які приймають ліки.
- Пацієнти з аномальним артеріальним тиском.
- Пацієнти, які не можуть вільно висловлювати власну волю.
- Пацієнти з порушеннями сприйняття через серйозні проблеми периферичного кровообігу, спричинені такими захворюваннями, як цукровий діабет.

Наступні ситуації забороняють використання:

- Пацієнти зі злоякісними пухлинами.
- Вагітним жінкам і породіллям.
- Пацієнтам з гострими гнійними запаленнями.
- Особи з тяжкими когнітивними порушеннями
- Особи зі спастичним паралічем.
- Особи з аномальним нервовим стресом
- Особи у фазі спазму після порушення мозкового кровообігу.
- Пацієнти зі схильністю до кровотеч.
- Користувачі кардіостимуляторів.
- Догляд за очима
- Пацієнтам з металевими імплантатами.
- Особи з порушеннями згортання крові.
- Поблизу людського серця.
- Люди з неясною свідомістю та деформаціями кінцівок і суглобів.



Примітка:

- Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням цього продукту.
- Якщо ви відчуваєте фізичний дискомфорт через відхилення в роботі цього продукту, негайно припиніть його використання. Зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте незвичні відчуття в тілі або шкірі, і дотримуйтесь медичних рекомендацій.
- Не робіть масаж за допомогою електронних пристроїв, оскільки це може спричинити несправності (наприклад, збій у роботі електронного годинника).
- Якщо виникла несправність і пристрій не може працювати, негайно відключіть живлення і вийміть його; інакше це може призвести до перегріву або короткого замикання, що може стати причиною нещасного випадку. Зверніться до служби підтримки для отримання післяпродажної консультації.
- Не підключайте та не від'єднуйте зарядний кабель мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або нещасного випадку.
- Не використовуйте пристрій під час сну, оскільки це може призвести до несправності пристрою і переміщення електродних подушечок на інші частини тіла, що спричинить дискомфорт.
- Будь ласка, носіть цей пристрій правильно для шийного відділу хребта, розміщуючи його симетрично з обох боків, щоб уникнути нещасних випадків або дискомфорту.
- Від'єднуючи зарядний кабель від пристрою, тримайтеся за штекер, а не за кабель, оскільки потягування за нього може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження виробу.
- Заряджайте пристрій відповідно до інструкції з експлуатації під час першого використання або якщо акумулятор розрядився після тривалого зберігання, щоб переконатися, що він працює належним чином.
- Після тривалого використання поверхня виробу може нагріватися.
- Коли пристрій працює, він помірно розминає область шиї;

Будь ласка, не використовуйте і не зберігайте цей виріб у наступних місцях:

- У місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів
- У місцях з водою
- У сильних електромагнітних полях
- Поблизу феєрверків
- У гарячих і вологих місцях
- У місцях з підвищеним вмістом пилу
- У місцях, схильних до вібрації та ударів



Рекомендація

- Перед використанням, будь ласка, переконайтеся, що основні кнопки хоста працюють належним чином.
- Якщо ви використовуєте виріб вперше або після тривалого зберігання розрядився акумулятор, зарядіть його відповідно до інструкції, щоб переконатися, що він працює належним чином.
- Будь ласка, утилізуйте цей пристрій відповідно до чинних міських стандартів захисту навколишнього середовища, щоб запобігти забрудненню навколишнього середовища.
- Рекомендовано для використання особам віком від 16 років.

Додаток Future Wear


1. Завантажте додаток "Future Wear" в магазині додатків або заскануйте QR код.




Google Play та логотип Google Play є торговельними знаками Google Inc. Apple та логотип Apple є торговельними знаками компанії Apple Inc.



2. Зареєструйтесь та увійдіть в додаток

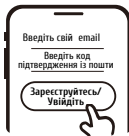

3. Увімкніть пристрій та увімкніть мобільний Bluetooth, а потім додайте пристрій у додаток "Future Wear".

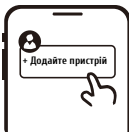

Цей пристрій відповідає частині 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment.

ПРИМІТКА: Це обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно не встановлене і не використовується відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодної гарантії, що при конкретній установці не виникнуть перешкоди.

Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телевізійного сигналів, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключити обладнання до розетки, яка відрізняється від тієї, до якої підключено приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телемайстра.

Пристрій пройшов перевірку на відповідність загальним вимогам щодо впливу радіочастотного випромінювання. Пристрій може використовуватися в портативному режимі без обмежень.

RSS-Gen Випуск 4 грудня 2014'&"CNR-Gen 4e грудня 2014:

-English:

Цей пристрій відповідає стандартам RSS Міністерства промисловості Канади, що не потребують ліцензування. Експлуатація залежить від дотримання двох умов:

- (1) цей пристрій не повинен створювати перешкод, і
- (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.



Цей пристрій було протестовано для типових операцій, що виконуються при носінні на тілі. Щоб відповідати вимогам щодо впливу радіочастотного випромінювання, між тілом користувача і телефоном, включаючи антену, повинна бути мінімальна відстань у 10 см

Сторонні ремінні затискачі, кобури та подібні аксесуари, що використовуються з цим пристроєм, не повинні містити металевих компонентів.

Натільні аксесуари, які не відповідають цим вимогам, можуть не відповідати вимогам щодо впливу радіочастотного випромінювання, і їх слід уникати. Використовуйте лише антену з комплекту постачання або схвалену антену. Цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС. Були проведені всі необхідні радіотести.

1. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ: РИЗИК ВИБУХУ У РАЗІ ЗАМІНИ БАТАРЕЇ НА БАТАРЕЮ НЕВІДПОВІДНОГО ТИПУ. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЇ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ**

2. Пристрій відповідає радіочастотним специфікаціям, коли пристрій використовується на відстані 0 мм від вашого тіла Заява про відповідність ЄС:

SKG Health technology Co. Цим заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС. Копія Декларації про відповідність ЄС доступна в Інтернеті за посиланням <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



рі електроприлади не можна утилізувати разом з іншими відходами, їх слід утилізувати окремо. Утилізація в пунктах збору громади через приватних осіб є безкоштовною. Власник відпрацьованих електроприладів несе відповідальність за їх доставку до цих або подібних пунктів збору. Цим невеликим особистим зусиллям ви робите свій внесок у переробку цінної сировини та переробку токсичних речовин.

Обережно:

- Якщо ви відчуваєте подразнення шкіри під час використання масажера, будь ласка, утримайтеся від його використання і зачекайте два-три дні, щоб побачити, чи не зменшаться ваші симптоми. Якщо симптоми не зникають або погіршуються, зверніться до лікаря.
- Якщо ви страждаєте на екзему, алергію або астму, використання масажера може спричинити подразнення шкіри або алергію. Прилад повинен жититися тільки від безпечної наднизької напруги, що відповідає маркуванню на приладі.

*Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.

* Діти не повинні гратися з приладом.

* Діти не повинні чистити прилад та здійснювати його обслуговування без нагляду дорослих.

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Адреса: 23А поверх, будівля 3, науково-дослідний парк Чжунке, № 009,
Південна 1-а дорога Гаосін, спільнота зони високих технологій, вулиця Юехай,
район Наньшань, Шеньчжень, провінція Гуандун,
Китай.

Вебсайт : <https://global.skq.com/>



Made in China