
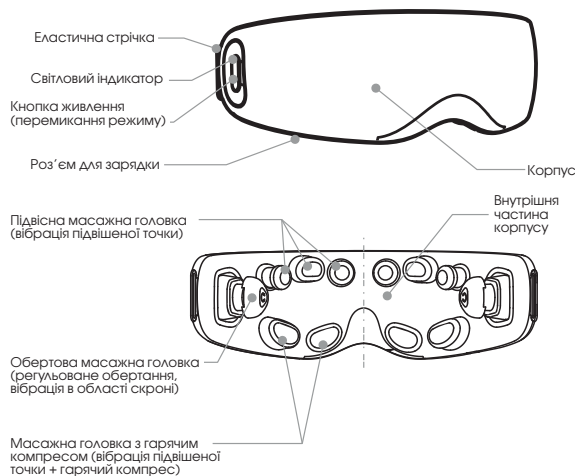


Зображення виробу

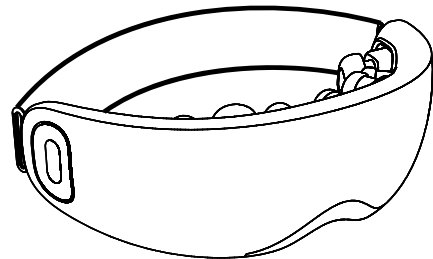

Інструкція з експлуатації

*** Перед застосуванням цього виробу відрегулюйте відповідним чином довжину еластичної стрічки, а потім надіньте на область навколо очей. Відрегулюйте на собі положення та щільність прилягання масажної головки, а потім запустіть хост, щоб спробувати масажний ефект.**

Робочі кроки:

1) Після тривалого натискання кнопки живлення хоста протягом приблизно 2 секунд хост запускається (лунає голосова підказка, горить індикатор підказки). При першому завантаженні за замовчуванням використовується режим вібрації, і цей режим можна переключити, якщо коротко натиснути кнопку живлення. При увімкненому живленні натисніть і утримуйте кнопку живлення близько 2 секунд, щоб вимкнути пристрій (лунає голосова підказка, індикатор гасне).

2) Якщо один раз натиснути кнопку живлення, режим перемикається на наступний; чотири режими перемикаються послідовно по колу (з голосовими підказками: «vibrant mode» (режим вібромасажу) «soothing mode» (заспокійливий режим), «sleep mode» (сплячий режим) і «eye exercises mode» (режим вправ для очей); в активному режимі, заспокійливому режимі і режимі вправ для очей відтворюється фонові музика). В різних режимах способи масажу різні, і в кожному режимі є функція гарячого компресу.

3) Робота хоста розрахована на 15 хвилин (± 30 секунд). Коли хост вмикається, він починає відлік часу. Він автоматично відключається через 15 хвилин (± 30 секунд), лунає голосове повідомлення про відключення (якщо він автоматично відключається в сплячому режимі, звукове повідомлення про відключення не відтворюється).

4) Якщо мобільний телефон увімкнено, Bluetooth шукає «S1511HB». Для першого підключення потрібно вручну натиснути на підключення. Після сполучення та збереження при кожному наступному вмиканні Bluetooth підключатиметься автоматично. Після успішного підключення лунає голосове повідомлення «Bluetooth connected» (Bluetooth підключено). Після того, як на мобільному телефоні вимикається Bluetooth,

хост видає голосове повідомлення «Bluetooth disconnected» (Bluetooth вимкнено). Якщо мобільний телефон підключає пристрій через Bluetooth і відтворює музику, музика масажера зупиняється і відтворюється музика з мобільного телефону.

5) Коли в пристрої розряджається акумулятор, це супроводжується повідомленням про низький рівень заряду акумулятора і світловий індикатор з синього змінюється на помаранчевий. В разі нестачі живлення пристрій автоматично відключається. Коли апарат відключається, перед відключенням записується режим масажу. Після наступного запуску апарат повернеться в той режим масажу, який був перед останнім вимиканням. Під час першого запуску увійдіть у режим за замовчуванням (режим вібромасажу).

Основні параметри виробу

Назва пристрою	E7-EN	Модель	S1511HB
Номинальна входна напруга	5 В постійного струму	Номинальна входна потужність	5 Вт
Ємність акумулятора	1500 мА-год 5,55 Вт-год		
Примітка. Цей пристрій є перезаряджуваним, і його можна заряджати через роз'єм Type-C. Його потрібно заряджати за допомогою стандартного зарядного пристрою з вихідними параметрами 5 В постійного струму, 1 А.			

⚠ Рекомендації

- Використовуйте пристрій в нормальних умовах: температура: 0 °C - 40 °C; відносна вологість: < 80%, без конденсації; атмосферний тиск 50 - 106 кПа.
- Нормальні умови транспортування та зберігання: діапазон температур навколишнього середовища: від - 20 до 55 градусів; діапазон відносної вологості: < 95% без конденсації; атмосферний тиск: 50 - 106 кПа.
- Рекомендується використовувати його не частіше двох разів на день, не більше півгодини кожного разу, залежно від вашої конкретної ситуації.

Щоденне обслуговування

- Якщо поверхня масажного пристрою забруднена, її можна протерти чистою м'якою тканиною, злегка змоченою водою. Його не можна протирати летючими рідинами, такими як спирт. Виріб не можна розбирати і промивати у воді.
- Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, накрийте його, щоб уникнути попадання пилу.
- У процесі чищення пристрою не допускайте потрапляння води або інших рідин всередину корпусу, щоб уникнути короткого замикання під час використання.

Примітки щодо утилізації продукту

Підтримуйте вторинну переробку перезаряджуваних акумуляторних батарей (літій-іонних акумуляторів).

⚠ Застереження

- Акумулятор у цьому виробі являє собою спеціальний перезаряджуваний акумулятор, не призначений для інших виробів. Не заряджайте знятий перезаряджуваний акумулятор.
- Не кидайте його у вогонь і не нагрівайте до високої температури.
 - Не проколюйте його цвяхами, не давайте йому падати під дією сили тяжіння і не розбирайте, щоб модифікувати.
 - Не з'єднуйте між собою позитивний та негативний полюси акумулятора за допомогою металевих предметів.
 - Не зберігайте його разом із намистом, шпильками для волосся тощо.
 - Не заряджайте, не використовуйте і не залишайте його в місцях з високою температурою, наприклад, біля каміну або під палючим сонцем.
 - Описані вище ситуації можуть призвести до нагрівання, займання та поломки.

⚠ Попередження

- Зберігайте знятий перезаряджуваний акумулятор в недоступному для немовлят і маленьких дітей місці, щоб дитина випадково не проковтнула його.
- При випадковому проковтуванні пристрою негайно зверніться до лікаря

- При витоку рідини з акумулятора не торкайтеся рідини руками, а вчиняйте з нею наступним чином.
- Якщо електроліт з акумулятора потрапив в очі, не тріть очі руками, щоб не втратити зір. Негайно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. При потрапленні електроліту акумулятора на тіло або одяг можлива поява подразнення шкіри або травмування. Промийте водою. Якщо ви все одно відчуваєте дискомфорт, негайно зверніться до лікаря.
- Розбирати можна лише викинуті вироби. В іншому разі це може призвести до загоряння, ураження електричним струмом чи травмування. Якщо необхідно відремонтувати акумулятор (не замінюючи його), зверніться до дилера, в якого ви придбали цей виріб.

Літій-іонний акумулятор у цьому виробі є цінним ресурсом, який можна переробити та використати повторно, але ставити його на місце не можна. Передайте його професійному агентству, яке зможе переробити акумуляторну батарею, після того, як цей виріб буде викинуто. Перед викиданням цього виробу вийміть з нього акумулятор. Перед вийманням акумулятора прилад необхідно вимкнути. Слід безпечно утилізувати акумулятор, для цього його необхідно вийняти, виконавши наступні дії:

- За допомогою професійних інструментів зніміть верхню та нижню частини корпусу.
- Зніміть друковану плату та електромотор.
- Вийміть акумулятор, обріжте дріт акумулятора професійними плоскогубцями, а потім вийміть акумулятор.

На що необхідно звернути увагу

⚠ Увага!

- Перед використанням цього виробу уважно прочитайте і дотримуйтесь інструкцій з експлуатації, наведених у посібнику з експлуатації. Компанія не несе відповідальності за наслідки, викликані неправильним використанням цього виробу або недотриманням відповідних інструкцій.
- Оскільки ми постійно вдосконалюємо свої вироби, технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

- Не використовуйте цей виріб після нанесення макіяжу на обличчя, це може пошкодити ваш макіяж і забруднити контактну поверхню виробу. Якщо таке сталося, очистіть забруднену поверхню чистою водою.
- Не користуйтеся масажером для очей під час водіння автомобіля.
- Не використовуйте прилад для масажу очей в місцях з надмірно високою температурою та вологістю.
- Не можна застосовувати пацієнтам з інсультом, артеріальною гіпертензією та артеріальною гіпотензією.
- Не можна застосовувати при наявності симптомів очних захворювань, таких як глаукома, катаракта, відшарування сітківки та почервоніння очей.
- Уникайте масажу очей після вживання алкоголю.
- Забороняється застосовувати пацієнтам, які перенесли операцію на око і страждають захворюваннями серця.
- Перед використанням приладу переконайтеся, що на очах немає контактних лінз, і зніміть шпильки, прикраси для волосся тощо.
- Цей виріб є засобом особистої гігієни для масажу і не може замінити собою ліки та медичні прилади.
- Дітям, вагітним жінкам і жінкам в період менструації забороняється користуватися інструментом для масажу очей.
- Всередині знаходиться літєвий акумулятор. Не тримайте виріб у середовищі з високою температурою.
- У випадках чутливої шкіри, алергічного дерматиту на обличчі та наявності пластикових матеріалів на обличчі використовуйте цей виріб згідно зі вказівками лікаря.
- Цей виріб має функцію нагрівання. Будьте обережні при його використанні особами, не чутливими до тепла.
- Якщо ви погано почуваетесь під час використання приладу, негайно припиніть його використання.
- Не робіть масаж жодних інших частин тіла, окрім очей. Забороняється самостійно розбирати цей виріб.
- Виріб не є водонепроникним. Не мийте його та не використовуйте в умовах високої вологості. Якщо корпус забруднений, можна обережно протерти його вологим рушником



Старі електроприлади не можна утилізувати разом із побутовими відходами, їх необхідно утилізувати окремо. Утилізація в комунальному пункті збору через приватних осіб здійснюється безкоштовно. Власник старої побутової техніки несе відповідальність за доставку побутової техніки до цих або подібних пунктів збору. Доклавши невеликих особистих зусиль, ви робите свій внесок у переробку цінної сировини та очищення токсичних речовин. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або подразнення шкіри при носінні смарт-годинника, рекомендуємо спробувати почистити ваш пристрій. Іноді на пристрої накопичуються залишки або сторонні речовини, які можуть подразнювати шкіру. Можливо також, що ви неправильно носите годинник. Рекомендуємо регулярно чистити і налаштовувати ваш годинник, щоб було зручніше його носити.

Обережно!

- Якщо ви відчуваєте подразнення шкіри під час носіння годинника, утримайтеся від його носіння та зачекайте два-три дні, щоб побачити, чи послабляться у вас симптоми. Якщо симптоми зберігаються або погіршуються, зверніться до терапевта.
- Якщо у вас екзема, алергія або астма, у вас може бути більшою вірогідність подразнення шкіри або алергії на пристрій, який ви носите.

- * Прилад необхідно живити лише безпечною наднизькою напругою, що відповідає маркуванню на приладі.
- * Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- * Діти не повинні грати з приладом.
- * Не дозволяйте дітям проводити чищення та технічне обслуговування пристрою без нагляду дорослих.