



SKG

Масажер для шиї та плечей
HS500-2

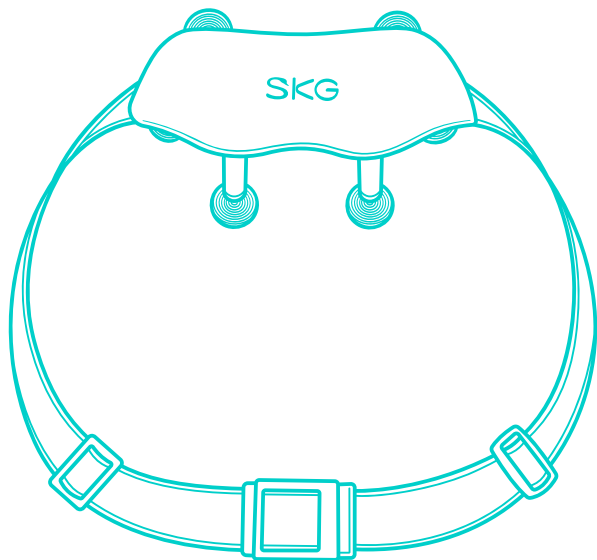


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

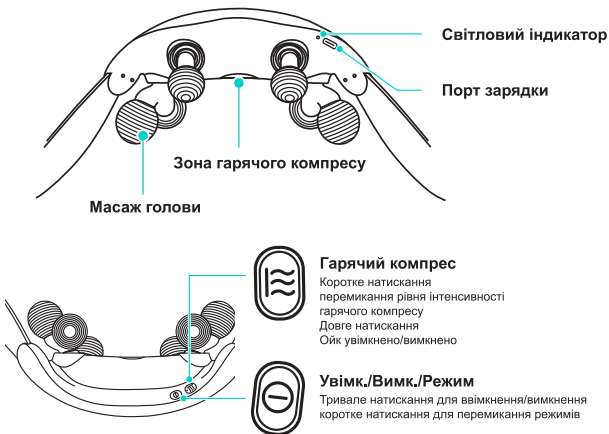

Опис світлового індикатора


Світлий колір	Світлий статус	опис
Зелене світло	Завжди ввімкнено	Заряд батареї $\geq 25\%$
Помаранчеве світло	Завжди ввімкнено	Заряд батареї $< 25\%$
Помаранчеве світло	Вимкніть після перепрошивання	Заряд батареї $< 9\%$
Помаранчеве світло	Дихання	Зарядка
Зелене світло	Дихання	Акумулятор повністю заряджений

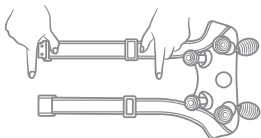


- 1 Потягніть за застібки-ковзалки та відрегулюйте лівий і правий реміні на відповідну однакову довжину.



- 2 Одягніть виріб на шию, потягніть бретельки до спини та застібніть застібку. Ви можете потягнути за застібки-пряжки, щоб відрегулювати щільність застібки.

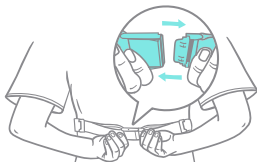

- 3 Після використання натисніть на засувку, щоб розстебнути реміні. Обережно зніміть виріб з плеча, щоб запобігти падінню.

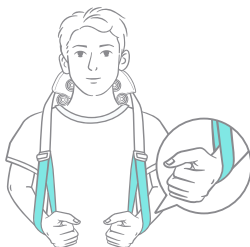

- 4 Цей продукт також можна використовувати шляхом ручного витягування. Одягніть виріб на шию та протягніть його обома руками через ремінець (як показано на малюнку)

Основні параметри продукту

Назва продукту	Масажер для шиї та плечей		
Модель	HS500-2	Номінальна вхідна напруга	5V ~
Ємність акумулятора	2200mAh/16.28Wh	Номінальна вхідна потужність	10W

- Коли поверхня масажера брудниться, протріть її чистою м'якою тканиною, змоченою невеликою кількістю води. Не протирайте поверхню леткими рідинами, такими як спирт.
- Виріб не можна розбирати або мити у воді.
Будь ласка, накривайте виріб, коли він не використовується протягом тривалого часу, щоб запобігти накопиченню пилу.
- Уникайте потрапляння води або інших рідин у машину під час очищення, щоб уникнути короткого замикання під час використання.

Інструкції з усунення несправностей

Якщо виріб не працює належним чином, перевірте, чи не виникли наступні ситуації. Якщо наші поради не вирішать проблему, будь ласка, поверніть виріб дилеру для ремонту.

Хвороба	Можливі причини	Рішення
Неможливо ввімкнути	Низький рівень внутрішньої батареї	Зарядіть продукт
	Продукт заряджається	Використовуйте після повної зарядки
Індикатор неможливо зарядити / немає зарядки	Зарядний кабель неправильно підключено до основного пристрою та адаптера живлення	Повторне підключення зарядки після відключення



Поради

- Використовуйте за нормальних умов експлуатації: Температура: від 0°C до 40°C; Відносна вологість: <80% відносної вологості, без конденсації; Атмосферний тиск: від 50 кПа до 106 кПа.
- Будь ласка, виберіть звичайні умови транспортування та зберігання: Діапазон температур навколишнього середовища: від -20°C до +55°C; Діапазон відносної вологості: ≤95% відносної вологості, без конденсації; Атмосферний тиск: від 50 кПа до 106 кПа.
- Рекомендується використовувати продукт не більше двох разів на день протягом не більше півгодини, залежно від конкретних потреб користувача.

Будь ласка, підтримайте переробку акумуляторних батарей (літій-іонних батарей)

 Небезпека	Акумулятор цього виробу є спеціалізованим акумулятором, який не слід використовувати в інших виробках. Не заряджайте акумулятор після його виймання. • Не кидайте у вогонь та не піддавайте дії надмірного тепла. • Не проколюйте цвяхами, не піддавайте сильним ударам та не розбирайте • Не з'єднуйте позитивний та негативний клеми акумулятора безпосередньо з металом • Не зберігайте його разом із намистами, шпильками для волосся тощо. • Не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою, таких як біля плити або під прямими сонячними променями • Усі вищезгадані сценарії можуть призвести до перегріву, пожежі або вибуху.
 УВАГА	Зберігайте вийнятий акумулятор у недоступному для немовлят місці, щоб запобігти випадковому проковтуванню. • У разі проковтування негайно зверніться за медичною допомогою. • У разі витікання батареї не торкайтеся рідини голими руками. • Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій з безпеки: • Існує ризик сліпоті, якщо рідина з акумулятора потрапить в очі. Не трійте око руками. Негайно промийте чистою водою та зверніться за медичною допомогою. Якщо рідина з акумулятора потрапить на тіло або одяг, це може спричинити запалення шкіри або травму. Промийте чистою водою, а якщо дискомфорт не зникає, негайно зверніться за медичною допомогою. • Розбирання дозволяється лише під час утилізації виробу. Недотримання може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травмування або іншого нещасного випадку. Будь ласка, зверніться до продавця, у якого ви придбали виріб, для ремонту (окрім заміни батареї).

Літій-іонний акумулятор, що використовується в цьому виробі, є цінним ресурсом, що підлягає переробці. Будь ласка, вийміть літій-іонний акумулятор перед утилізацією та передайте його професійній організації, яка займається переробкою та обробкою акумуляторних акумуляторів.

- За допомогою професійних інструментів відкрийте верхній та нижній корпуси.
- Вийміть акумулятор, переріжте дріт акумулятора професійними плоскогубцями, а потім вийміть акумулятор.
- Вийміть акумулятор, переріжте дріт акумулятора професійними плоскогубцями, а потім вийміть акумулятор.

Етапи видалення:

1. Відкрийте оболонку за допомогою інструментів;
2. Послабте гвинти на друкованій платі;
3. Відріжте провід акумулятора ножицями;
4. Вийміть акумулятор;

Обмеження використання та місця розташування

- Будь ласка, не використовуйте цей продукт разом із наступними медичними електронними пристроями, щоб уникнути перешкод та потенційної шкоди: Внутрішні медичні електронні пристрої, такі як кардіостимулятори Життєзабезпечувальні медичні електронні пристрої, такі як апарати штучного кровообігу
- Медичні електронні пристрої, такі як електрокардіографи
Не використовуйте цей виріб під час керування автомобілем, скелелазіння або виконання інших небезпечних видів діяльності.
- Існує ризик отримання низькотемпературних опіків, якщо цей продукт використовувати протягом тривалого часу. Не використовуйте його під час сну або без свідомості.

Попередження

- Цей продукт є засобом особистої гігієни для масажу та не може замінити ліки та медичні прилади.
- Вагітним жінкам та жінкам після пологів слід використовувати його з обережністю. Будь ласка, використовуйте його з дозволу та під керівництвом лікаря.
- Чутлива шкіра, будь ласка, використовуйте з дозволу та під наглядом лікаря
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час використання, негайно припиніть його використання.
- Цей продукт містить літєві батареї. Будь ласка, не розбирайте, не модифікуйте, не занурюйте виріб у воду та не кидайте на нього вогонь.
- Під час масажу голови слід уникати контакту з ранами та шрамами.
- Під час масажу масажну головку не слід розмішувати поблизу серця грудної клітки.

Не використовуйте та не зберігайте цей виріб у таких місцях

- Біля феєрверків
- Сильні електромагнітні місця
- Місця з високою температурою і підвищеною вологістю
- Місця, чутливі до вібрації та ударів
- Місця з великою кількістю пилу
- Автозаправні станції, цехи з високим рівнем запиленості та інші легкозаймисті та вибухонебезпечні місця

Наступним людям слід проконсультуватися з лікарем перед використанням

- Пацієнти з цереброваскулярними захворюваннями або порушеннями кровообігу, запаленням, набряком, гноєм та іншими захворюваннями шкіри шиї
- Пацієнти, які отримують медикаментозне лікування та почуваються незвично
- Пацієнти з сенсорними порушеннями внаслідок високого рівня периферичного кровообігу, спричиненого діабетом тощо.

- Хворі на інфекційні захворювання
- Пацієнти з аномальним артеріальним тиском
- Пацієнти з порушеннями чутливості
- Пацієнти з температурою тіла понад 38 градусів (період лихоманки)
- Пацієнти з аномаліями серця та черепних нервів
- Пацієнти, які не можуть вільно висловлювати свої побажання



Не використовуйте в наступних ситуаціях:

- Хворі на злоякісні пухлини
- Біля серця людського тіла
- Пацієнти з металевими імплантатами
- Вагітні або породіллі
- Користувачі кардіостимуляторів
- Пацієнти з гострим гнійним запаленням
- Пацієнти з порушеннями згортання крові
- Пацієнти зі схильністю до кровотеч
- Хворі зі спастичним паралічем
- Пацієнти з важкими когнітивними порушеннями
- Пацієнти у спастичній фазі після інциденту мозкового кровообігу
- Особи з аномальними нейрогенними стресовими реакціями
- Деформації контрактур суглобів кінцівок. Немовлята, діти та особи, які повністю або частково втратили свідомість.



Запобіжні заходи:

- Будь ласка, прочитайте інструкції перед використанням цього продукту
- Якщо ви відчуваєте нездужання через несправність цього продукту, негайно припиніть його використання, зверніться до лікаря та дотримуйтесь його порад.
- Якщо виникне нештатна ситуація, через яку неможливо буде експлуатувати пристрій, негайно усуньте її та зверніться до служби підтримки клієнтів для отримання консультації після продажу.
- Не підключайте та не відключайте зарядний кабель мокрими руками, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або нещасного випадку
- Будь ласка, правильно одягайте цей виріб на шийному відділі хребта, забезпечуючи його симетричне розташування з лівого та правого боків.
- Від'єднуючи зарядний кабель від корпусу виробу, не тягніть за дріт. Натомість, візьміться за вилку та витягніть її з розетки, щоб уникнути ураження електричним струмом або пошкодження виробу.
- Під час першого використання, оскільки заряд батареї виробу низький після тривалого зберігання, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій з експлуатації, щоб виконати операції заряджання, щоб забезпечити його нормальну роботу.
- Коли виріб працює тривалий час, поверхня нагрівається, що є нормальним явищем.
- Виріб буде помірно тертися об шию під час роботи. Будь ласка, не робіть масаж безперервно протягом тривалого часу. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зробіть невелику перерву, перш ніж використовувати його знову.
- Утилізуючи цей продукт, будь ласка, утилізуйте його відповідно до чинних міських норм охорони навколишнього середовища, інакше це може спричинити забруднення навколишнього середовища.
- Цей виріб не є медичним виробом і не має функції діагностики та лікування

захворювань шії.

- Під час масажу, якщо ви хочете передати масажер іншій людині, обов'язково вимкніть його перед початком роботи.
- Пристрій має нагрівальну поверхню, тому людям, які не чутливі до тепла, слід бути обережними під час його використання.
- Щоб запобігти травмам від защемлення, будьте обережні та не кладіть пальці чи інші частини тіла у вузькі частини пристрою.



Примітка: Це обладнання було протестовано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В, згідно з частиною 15 Правил FCC. Ці обмеження розроблені для

забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його встановити та використовувати не відповідно до інструкцій, воно може спричинити шкідливі перешкоди радіозв'язку. Однак немає гарантії, що в конкретній установці не виникне перешкод. Якщо це обладнання створює шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та ввімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наступних заходів:

* Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

* Збільште відстань між обладнанням та приймачем.

* Підключіть обладнання до розетки, що знаходиться в колі, відмінному від того, до якого підключено приймач.

* Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телетехніка.



Цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви (ЄС) 2023/988. **УВАГА: РИЗИК ВИБУХУ, ЯКЩО БАТАРЕЙКУ ЗАМІНИТИ НА НЕПРАВИЛЬНИЙ ТИП.**

УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЙКИ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ.

Заява про відповідність ЄС:

SKG Health technology Co., Ltd. Цим заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви (ЄС) 2023/988. Копія Декларації про відповідність вимогам ЄС доступна онлайн за адресою <https://www.skg.com/pag-es/skg-declaration-of-conformity>.



Старі електроприлади не можна викидати разом із залишковими відходами, а потрібно утилізувати окремо. Утилізація в комунальному пункті збору відходів приватними особами є безкоштовною. Власник старих приладів зобов'язаний доставляти їх до цих або аналогічних пунктів збору. Цими невеликими особистими зусиллями ви робите свій внесок у переробку цінної сировини та очищення від токсичних речовин.



FR
**Cet appareil
et sa batterie
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**

ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
**DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI**



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009,
Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

If you want to know more about product specification information, please visit:
<https://files-global.skg.com/global/manual/1205050293.html>



Made in China