



## **МАСАЖЕР ДЛЯ НІГ**

**NEOR RELA CM24**

**ІНСТРУКЦІЯ**

## **ЗМІСТ**

1. Заходи безпеки та застереження
2. Зовнішній вигляд та опис
3. Розпаковування
4. Перше використання
5. Експлуатація
6. Очищення
7. Зберігання
8. Гарантійне обслуговування
9. Технічні характеристики

## 1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням масажеру, і використовуйте його належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.


Наступні користувачі повинні проконсультуватися з лікарем перед використанням масажеру якщо:

- встановлено кардіостимулятор або подібний імплантований медичний пристрій;
- страждає на захворювання серця;
- крихкими або пошкодженими кістками;
- пошкодженим хребтом;
- щойно переніс операцію;
- вагітна або після пологів;
- страждає на остеопороз;
- страждає на проблеми з кровообігом або тромбоз;
- страждає на шкірну інфекцію;
- отримує лікування або допоміжне лікування;
- з відхиленнями в кінцівках;
- страждає від спондиліозу та травми хребта внаслідок нещасного випадку або хвороби.

1. Якщо є механічна чи електронна несправність, будь ласка не використовуйте масажер, а зверніться до місцевого продавця або сервісного центру.
2. Не використовуйте масажер у дуже вологих і високотемпературних приміщеннях і не використовуйте його біля предметів опалення (таких як електроопалення, печі, відкриті джерела вогню).
3. Будь ласка не використовуйте масажер у вологому середовищі, наприклад у ванній кімнаті або в місцях поблизу кранів або басейнів.
4. Будь ласка, не застосовуйте медичні або косметичні засоби (креми або лосьйони) до або під час використання масажера.
5. Не трусіть та не кидайте масажер.
6. Не намотуйте шнур живлення навколо масажеру.
7. Не ставайте на масажер і не ставте на нього важкі предмети.
8. Якщо масажер виходить з ладу, будь ласка, від'єднайте блок живлення та негайно зверніться до сервісного центру.
9. Перед використанням масажеру переконайтеся, що напруга в розетці відповідає зазначеній в технічних характеристиках.
10. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.
11. Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на масажер, шнур живлення та вилку.

12. Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте масажер поза приміщеннями.
13. Вимикаючи масажер з електричної мережі, не тягніть за шнур, треба тягнути за вилку мережевого шнура.
14. Не беріться за мережеву вилку або за корпус масажера мокрими або вологими руками.
15. Під час роботи не накривайте масажер різними конструкціями або одягом.
16. Перш ніж увімкнути масажер, перевірте чи штекер шнура живлення повністю вставлений в гніздо. Якщо він не повністю вставлений, це може викликати нагрівання або пожежу.
17. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
18. Не використовуйте масажер з пошкодженим шнуром живлення або вилкою.
19. Не кладіть масажер у воду чи інші рідини, щоб уникнути короткого замикання або ураження електричним струмом.
20. Не підключайте масажер до розетки, що має пошкодження.
21. Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого масажера знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
22. Температура в приміщеннях, де використовується масажер, повинна бути в діапазоні від +5°C до +40°C.
23. Користувач не повинен залишати без нагляду увімкнений в мережу масажер, оскільки це може бути джерелом небезпеки.
24. Не залишайте дітей без нагляду поряд з масажером та не дозволяйте їм гратися з ним.
25. Масажер та блок живлення потрібно тримати в недосяжних місцях для малолітніх дітей.
26. Забороняється самостійно ремонтувати масажер. Не розбирайте його самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння вимкніть його з електричної мережі та зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
27. До початку роботи масажера його необхідно поставити на рівну суху робочу поверхню.
28. Захищайте кабель живлення від фізичного чи механічного пошкодження. Не згинайте і не розтягуйте кабель із застосуванням фізичної сили. Не притискайте його важкими предметами.

## 2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС

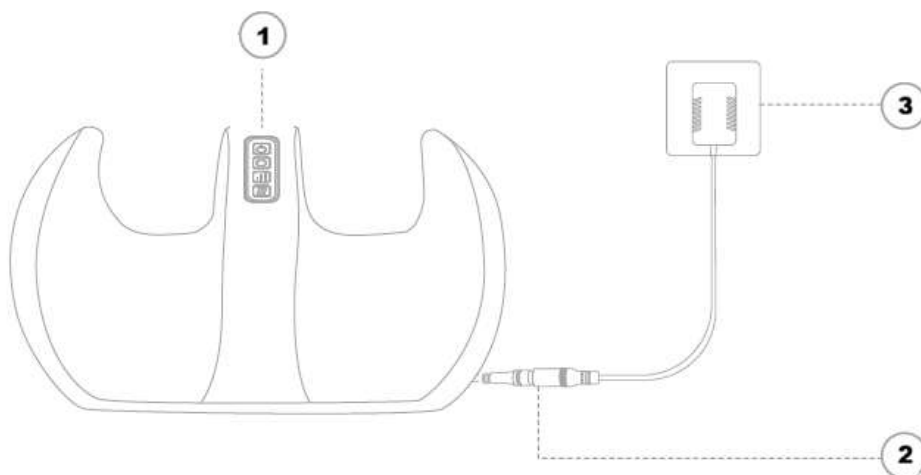

1. Панель керування
2. Місце підключення кабелю живлення
3. Блок живлення

## 3. РОЗПАКУВАННЯ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

1. Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
2. Перевірте цілісність пристрою та кабелю живлення, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
3. Перед вмиканням переконайтеся в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.


## 4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням будь ласка, зарядіть батарею протягом 2 годин. Для заряджання підключіть кабель живлення до масажера та вставте блок живлення у розетку. Після чого на панелі керування має загорітися червоний індикатор.

## 5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Даний масажер має вбудований акумулятор та може працювати як від мережі так і від акумулятора. Підключивши блок живлення до масажера та увімкнувши його, він автоматично почне працювати від мережі, щоб масажер почав працювати від акумулятора, від'єднайте кабель живлення від масажера.

## Панель керування:

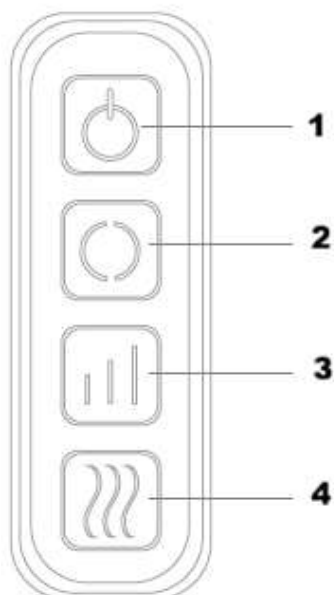

1. Кнопка увімкнення/вимкнення
2. Реверс
3. Інтенсивність
4. Підігрів

Щоб увімкнути масажер натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення не менше 2 секунд. Для вимкнення масажера достатньо короткого натискання кнопки.

Масажер має 3 рівні швидкості, можливість увімкнути/вимкнути підігрів та можливість змінити напрям руху масажних роликів “Кнопка Реверс”. В масажер вбудоване автоматичне вимкнення через 15 хв.

## 6. ОЧИЩЕННЯ

Завжди вимикайте прилад перед очищенням.

1. Під час чищення приладу використовуйте лише злегка зволожену серветку.
2. Очищайте прилад лише вказаним способом. Не допускайте потрапляння рідин у прилад.
3. Використовуйте прилад знову тільки після того, як він повністю висохне.
4. Не використовуйте абразивні засоби для чищення або жорсткі щітки.
5. Якщо масажер не використовується тривалий час, рекомендується зберігати його в сухому місці в оригінальній упаковці. При цьому не слід класти на прилад будь-які предмети.

## 7. ЗБЕРІГАННЯ

1. Зберігайте пристрій у сухому місці при кімнатній температурі.
2. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями місці.
3. Бажано зберігати пристрій у фабричному пакуванні.

## 8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Гарантійний термін становить 1 рік.

Строк служби виробу становить 3 роки

Після закінчення строку служби виробу виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Гарантійний термін обслуговування вказано у гарантійному талоні.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями;
- корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання;
- пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин;
- пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами.

## 9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Назва приладу	Масажер для ніг NEOR RELA
Модель приладу	CM24 BL
Напруга живлення, В	12
Максимальна потужність, Вт	24
Тип керування	Механічний
Матеріал корпусу	ЕКО- шкіра, Пінополіуретан
Габаритний розмір, см	40x22x24
Габаритний розмір пакування, см	40x24x24
Комплект постачання	Масажер – 1 од, гарантійна картка – 1 од, блок живлення – 1 од.

\* технічні характеристики можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення

**Офіційний представник в Україні:** ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

**Виробник:** ZHEJIANG LICHANG HEALTH PRODUCTS TECHNOLOGY CO., LTD.,

Адреса: District C Songqiao Standard Factory Building, Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhjiang Province, China