



МАСАЖЕР ПОРТАТИВНИЙ

NEOR PULSE HOME 30

ІНСТРУКЦІЯ

ЗМІСТ

1. Заходи безпеки та застереження
2. Зовнішній вигляд та опис
3. Розпаковування
4. Перше використання
5. Експлуатація
6. Очищення
7. Зберігання
8. Гарантійне обслуговування
9. Технічні характеристики

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням приладу, і використовуйте його належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.


- 1) Перед використанням переконайтеся, що корпус масажеру, кабель живлення та його насадки не мають видимих пошкоджень.
- 2) Не використовуйте прилад при болісних відчуттях або травмах (наприклад, грижі міжхребцевого диска, відкритій рані) в області ділянок тіла, що масажуються.
- 3) Не використовуйте прилад за наявності кардіостимулятора.
- 4) Категорично забороняється використовувати прилад для масажу серця.
- 5) Категорично забороняється використовувати прилад на опухлих, обпечених, запалених або травмованих ділянках шкіри та частинах тіла.
- 6) Не використовуйте прилад при рваних ранах, розширених капілярах, варикозі, вугрових висипах, куперозі, герпесі або інших захворюваннях шкіри.
- 7) Не використовуйте прилад для масажу голови.
- 8) Не використовуйте прилад для масажу обличчя (очей), гортані або інших особливо чутливих частин тіла.
- 9) Не використовуйте пристрій у зоні бікіні.
- 10) Не використовуйте пристрій під час сну.
- 11) Не використовуйте прилад на тваринах.
- 12) Не використовуйте прилад при прийомі медикаментів або алкоголю (ризик обмеженої сприйнятливості).
- 13) Перед використанням приладу проконсультуйтеся з лікарем, особливо:
 - за наявності будь-якого серйозного захворювання;
 - за наявності кардіостимулятора, імплантатів чи інших медичних пристроїв;
 - при тромбозах;
 - при діабеті;
 - за наявності болю невизначеного походження;
 - під час вагітності;
- 14) Пристрій призначений тільки для використання у побуті. Не використовуйте в комерційних цілях. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням.
- 15) Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі.
- 16) Підтримуйте відкриті вентиляційні отвори вільними від пилу і бруду.
- 17) Не вставляйте жодних предметів у вентиляційні або інші отвори масажеру.
- 18) Не використовуйте прилад, якщо Ви знаходитесь у транспортному засобі.
- 19) Переконайтеся, що прилад не контактує з водою або іншими рідинами.
- 20) У жодному разі не намагайтеся брати прилад до рук, якщо він упав у воду.
- 21) Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості до джерел тепла або відкритого полум'я.
- 22) Не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати прилад. За допомогою зверніться до авторизованого сервісного центру.
- 23) Перед тим як зняти, встановити або поправити насадку масажера, переконайтеся, що прилад вимкнений.
- 24) Перш ніж увімкнути пристрій, переконайтеся, що насадка встановлена правильно.
- 25) Використовуйте тільки насадки, що йдуть в комплекті з виробом.

- 26) Не залишайте пристрій без нагляду, коли він працює. Необхідний ретельний нагляд, якщо пристрій використовується дітьми або поряд із ними.
- 27) Не використовуйте безперервно більше однієї години. Дайте пристрою відпочити протягом 30 хвилин перед наступним використанням.
- 28) Не залишайте дітей без нагляду поряд з масажером та не дозволяйте їм гратися з приладом та насадками до нього.
- 29) Діти повинні користуватися приладом тільки під наглядом дорослих.
- 30) Не накривайте працюючий прилад ковдрою, подушкою тощо.
- 31) Не використовуйте прилад поблизу ємностей з бензином або іншими займистими речовинами.
- 32) Використовуйте прилад тільки в сухих приміщеннях (наприклад, ніколи не використовуйте його у ванній або сауні).
- 33) Використовуйте прилад лише з елементами, які входять до комплекту постачання.
- 34) Прилад та насадки слід захищати від ударів, пилу, хімікатів, сильних коливань температури, електромагнітних полів. Не варто застосовувати прилад поблизу джерел тепла (печей, радіаторів опалення).
- 35) Ніколи не залишайте прилад увімкненим або підключеним до зарядного пристрою без нагляду.

Правила поводження з акумуляторами:

- У разі потраплення електроліту на шкіру або в очі промийте відповідну ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря.
- Небезпека удушення! Маленькі діти можуть проковтнути акумуляторні батареї, що спричинить удушення. Зберігайте акумуляторні батареї в недоступному для дітей місці!
- Якщо акумуляторна батарея потекла, захисні вдягніть рукавички та утилізуйте прилад.
- Захищайте акумуляторні батареї від впливу надмірного тепла.
- Не кидайте акумуляторні батареї у вогонь. Небезпека вибуху!
- Не розбирайте акумуляторні батареї, не відкривайте та не подрібнюйте їх.
- Використовуйте тільки ті зарядні пристрої, які вказані в інструкції з користування приладом.
- Заряджайте прилад лише за допомогою мережевого адаптера з комплекту постачання.
- Щоб максимально подовжити термін служби акумулятора, заряджайте його повністю не менше двох разів на рік.
- Для зарядки завжди попередньо вимикайте прилад.
- Перед використанням акумулятори необхідно правильно зарядити. Для правильної зарядки необхідно завжди враховувати дані виробника та дотримуватися вказівок інструкції з користування приладом.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС

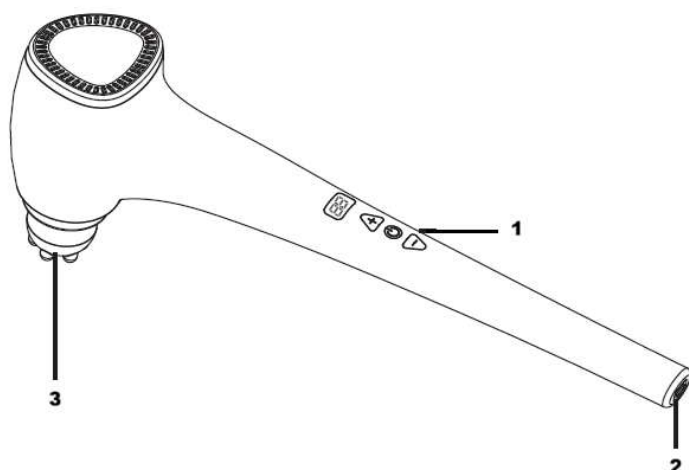

1. Панель керування
2. Роз'єм для USB кабелю
3. Насадка

Насадки



3. РОЗПАКУВАННЯ

Після транспортування або зберігання пристрою при температурі нижче 0°C необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.


1. Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
2. Перевірте цілісність масажера та його комплектуючих, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.

4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням будь ласка повністю зарядіть батарею протягом. Для заряджання підключіть кабель живлення до адаптера та під'єднайте його до масажера, після чого під'єднайте блок живлення до електричної мережі.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Панель керування

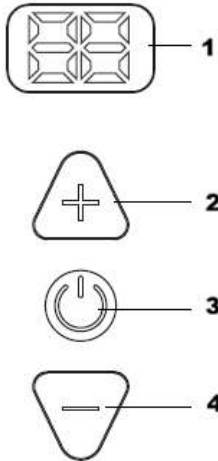

1. Дисплей
2. Кнопка збільшення швидкості
3. Кнопка увімкнення/вимкнення
4. Кнопка зменшення швидкості

Для увімкнення або вимкнення масажера, натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд. Після чого можна збільшити або зменшити рівні швидкості, коротким натисканням на + або - , на дисплеї буде відображено час до автоматичного вимкнення в хвилинах. Загалом є 9 рівнів швидкості. Рівні швидкості будуть відображені на дисплеї масажера під час збільшення або зменшення швидкості.

Масажер має 7 режимів масажу, переключення режиму здійснюється коротким натисканням на кнопку увімкнення, всі зміни будуть відображені на дисплеї.

Для того щоб змінити насадку, вимкніть масажер, зніміть насадку потягнувши її, після чого оберіть бажану насадку та встановіть її.

Після встановлення масажера на зарядку, на моніторі заряду акумулятора буде відображено поточну ємність заряду батареї у відсотках. Після завершення заряджання буде відображено число 99.

6. ОЧИЩЕННЯ

Завжди вимикайте прилад перед очищенням.

1. Під час чищення приладу використовуйте лише злегка зволожену серветку.
2. Очищайте прилад лише вказаним способом. Не допускайте потрапляння рідин у прилад.
3. Використовуйте прилад знову тільки після того, як він повністю висохне.
4. Не мийте прилад і насадки до нього у посудомийній машині.
5. Не використовуйте абразивні засоби для чищення або жорсткі щітки.

Якщо масажер не використовується тривалий час, рекомендується зберігати його в сухому місці в оригінальній упаковці. При цьому не слід класти на прилад будь-які предмети.

7. ЗБЕРІГАННЯ

1. Зберігайте пристрій у сухому місці при кімнатній температурі.
2. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
3. Бажано зберігати пристрій у фабричному пакуванні.

7. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Строк служби виробу становить 3 роки.

Гарантійний термін вказаний в гарантійному талоні.

Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- Випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- Пошкодження в результаті стихійного лиха;
- Пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до уповноваженого сервісного центру.

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ*

Назва приладу	Масажер портативний NEOR PULSE HOME
Модель приладу	30 BL
Матеріал	Поліпропілен, ABS пластик
Тип двигуна	Щітковий
Кількість швидкостей	9
Кількість режимів масажу	7
Тип керування	Механічний
Номінальна напруга живлення	5 В
Номінальна потужність	30 Вт
Час зарядки	2-3 години
Час роботи	10 хв
Місткість акумулятора	2000 мАг
Тип батареї	Li-ion
Розмір виробу	43x14x8 см
Розмір упаковки	47x 17x10 см
Строк служби виробу	3 роки
Комплект постачання	Масажер портативний – 1 од, насадки – 4 од , кабель живлення USB Type C – 1 од, гарантійна картка – 1 од.

* технічні характеристики можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення

Офіційний представник в Україні: ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: ZHEJIANG LICHANG HEALTH PRODUCTS TECHNOLOGY CO., LTD.,

Адреса: District C Songqiao Standard Factory Building, Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhjiang Province, China